



1. Pase las suturas a través del bucle del enhebrador de sutura.

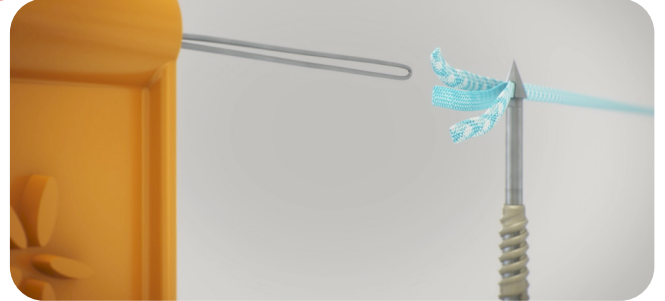

2. Tire del enhebrador de sutura para cargar el implante con las suturas. Repita el paso 1 y 2 hasta que haya cargado todas las suturas que quiera.

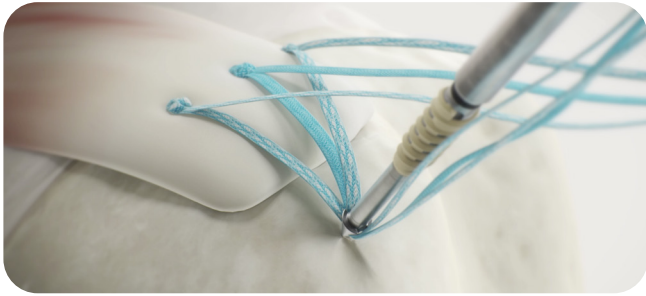


3. Localice el lugar de inserción. Prepare un orificio con el dispositivo de preparación de orificios indicado en las instrucciones de uso.




4. Introduzca el dispositivo en la articulación y estire las suturas si están flojas antes de insertarlo.




5. Inserte el implante distal en el hueso hasta que la primera espira del implante proximal esté situada parcialmente dentro del hueso. Tense las suturas para garantizar una compresión adecuada del tejido. Mantenga fijas las suturas si así lo desea. Asegúrese de que la primera espira del anclaje proximal esté parcialmente colocada en el hueso.

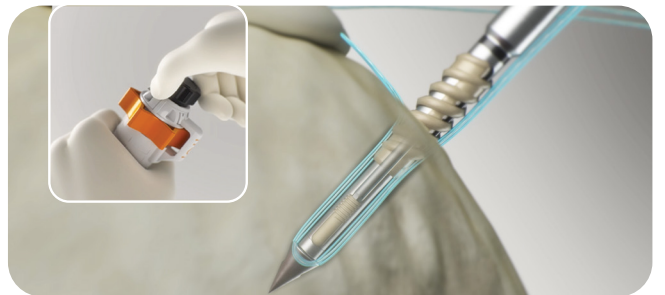

6. Baje el implante interno girando la rosca negra más pequeña y más proximal. Gire la rosca en sentido horario hasta que escuche como mínimo un clic.

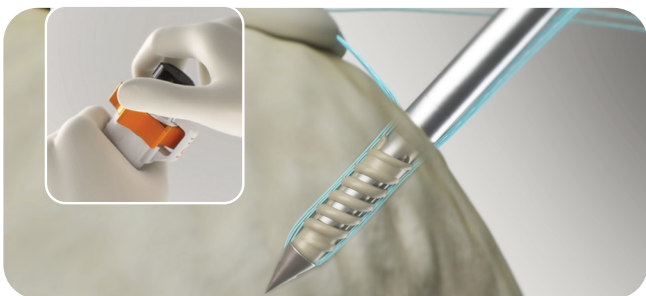

7. Gire la rosca más grande y más distal (color naranja) en sentido horario para hacer avanzar el implante proximal, hasta que la marca de láser esté al mismo nivel que la superficie del hueso. Tire hacia atrás de la manija para retirar el insertador de la articulación.

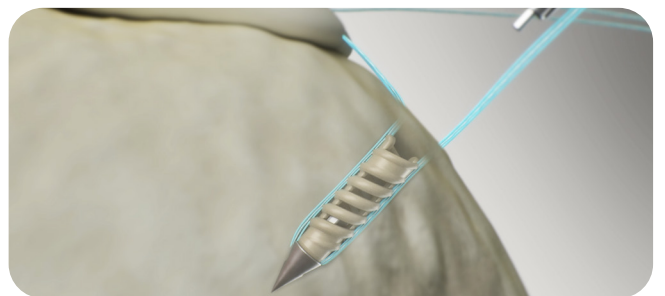

8. Tire hacia atrás del insertador para retirarlo.

Información para pedidos

| Anclajes de sutura HEALICOIL® Knotless PK | |
|---|---|
| N.º de referencia | Descripción |
| 72205137 | Anclaje de sutura HEALICOIL Knotless PK, 5,0 mm |
| 72205138 | Anclaje de sutura HEALICOIL Knotless PK, 5,0 mm autoterrajante |
| 72205308 | Broca 4,75 mm con punta de pala para el anclaje de sutura HEALICOIL Knotless PK, reutilizable |
| 72201915 | Punzón cónico, 3,8 mm, reutilizable |
| 72202621 | Punzón cónico, 3,8 mm, desechable |
| 72203710 | Terraja, 5,5 mm, reutilizable |
| 72203952 | Terraja, 5,5 mm, desechable |

Todas las fotos y diagramas se proporcionan solo con fines ilustrativos. Los productos no están a escala.

Para obtener más información sobre la aplicación de cualquiera de los productos mencionados en esta presentación, incluidas sus indicaciones de uso, contraindicaciones e información de seguridad del producto, consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente.

Más información en [smith-nephew.com](https://www.smith-nephew.com)