


1. Esporre l'osso nella posizione di inserimento desiderata per l'impianto. Collegare la punta per trapano adeguata a un trapano ortopedico standard. Verificare di serrare il mandrino del trapano non oltre le parti piatte all'estremità prossimale del trapano.




2. Posizionare la punta della guida per trapano con l'otturatore contro la superficie ossea nella posizione desiderata, quindi rimuovere l'otturatore. Il contrassegno a mezzaluna al laser indica l'orientamento della curvatura.




3. Inserire la punta appropriata nella guida per trapano. In caso di osso denso può essere necessario alternare il movimento della punta di trapanazione dentro e fuori il sito di impianto per garantire l'asportazione completa dell'osso. Quindi, rimuovere la punta per trapano.

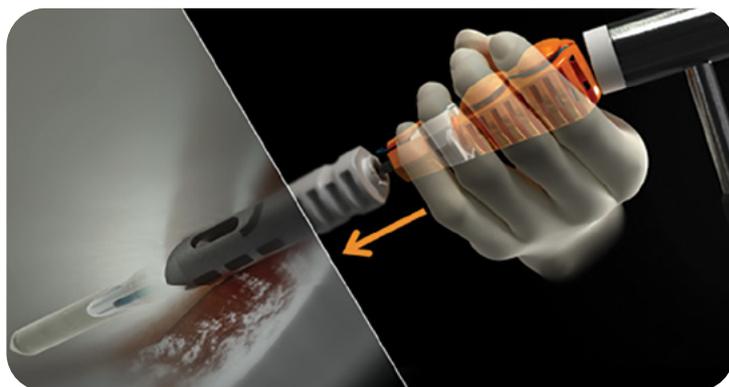

4. Inserire l'ancora per sutura precaricata nell'estremità prossimale della guida per trapano. Mentre si mantiene la pressione distale sul dispositivo di inserimento, spingere e/o picchiettare sull'estremità prossimale del dispositivo stesso per inserire l'ancora. Accertarsi che l'inseritore per ancore sia ben innestato nella guida per trapano prima di rilasciare l'ancora.

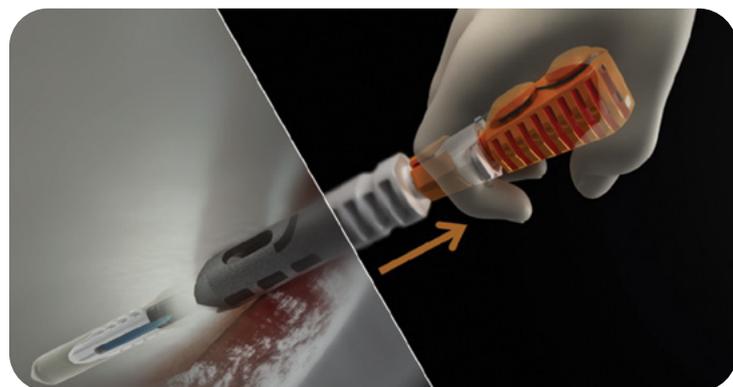

5. Per staccare l'ancora, tenere saldamente l'impugnatura nel palmo della mano e tirare con due dita sui punti di presa per ritrarre il meccanismo tenditore di suture.

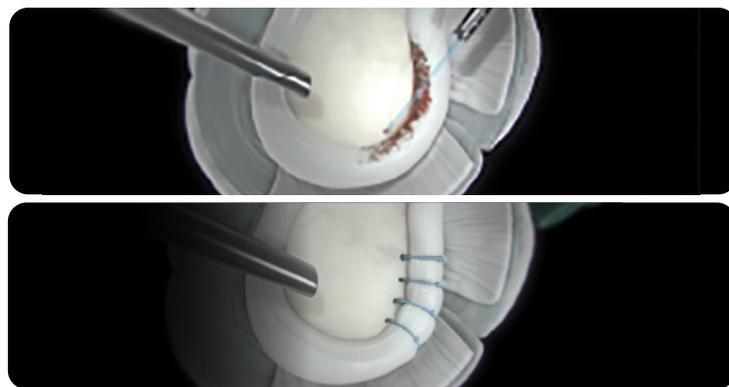

6. Applicare le suture attraverso il tessuto e completare la riparazione con la tecnica desiderata (ripetere i passaggi da 2 a 6 per completare la riparazione).

Informazioni per gli ordini

Ancore per sutura MICRORAPTOR® REGENESORB®

Codice N.	Descrizione
72204983	Ancora per sutura MICRORAPTOR REGENESORB con UNA sutura ULTRABRAID® n. 1 (blu)
72204984	Ancora per sutura MICRORAPTOR REGENESORB con UNA sutura ULTRABRAID n. 1 (COBRAID blu)

Guide per trapano, punte per trapano e otturatori MICRORAPTOR REGENESORB

Codice N.	Descrizione
72204988	Punta per trapano da 1,6 mm MICRORAPTOR
72205267	Punta per trapano per ossa dure da 1,8 mm MICRORAPTOR
72204991	Guida per trapano con punta a corona MICRORAPTOR
72204992	Guida per trapano con punta a spillo MICRORAPTOR
72204993	Guida per trapano con punta a corona, curva MICRORAPTOR
72204995	Guida per trapano con punta a bocca di pesce MICRORAPTOR
72204999	Otturatore con punta smussata e cannulata MICRORAPTOR
72205000	Otturatore con punta smussata e cannulata MICRORAPTOR
72205001	Otturatore con punta trocar MICRORAPTOR

Tutte le foto e le figure sono unicamente a scopo illustrativo. Prodotti non in scala.

Per maggiori informazioni sull'applicazione di qualsiasi prodotto esposto in questa presentazione, incluse indicazioni per l'uso, controindicazioni e informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) di tale prodotto. Per ordinare questi strumenti, chiamare il numero **+1 800 343 5717** negli U.S.A. o contattare un rappresentante Smith+Nephew autorizzato.

Per saperne di più vai all'indirizzo smith-nephew.com

Fabbricante

Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810
U.S.A.
www.smith-nephew.com

Contatto

Smith & Nephew, S.r.l.
Via De Capitani 2A
20864 Agrate Brianza MB
Italia
www.smith-nephew.it
T +39 039 60941
F +39 039 651535

◊Marchio commerciale di Smith & Nephew.

©2019 Smith & Nephew. Tutti i diritti riservati.
Riservato al personale medico.
Tutti i marchi commerciali appartengono ai rispettivi titolari.
Stampato negli U.S.A. 15214-it V4 12/19