

El cambio al apósito de espuma ALLEVYN[®] LIFE ayudó a reducir significativamente la frecuencia de cambio de apósito y los costes semanales de apósito, además de mejorar la satisfacción del tratamiento

+ Puntos positivos

En comparación con apósitos previos, ALLEVYN LIFE:

1.48

Menos cambios de apósitos por paciente / semana
(1.66 vs 3.14; p<0.001)

58.7%

Reducción coste medio semanal de apósitos por paciente
(€27.75 vs €11.46; p<0.001)

Mayor satisfacción con el tratamiento para profesionales sanitarios y pacientes



Resumen

- Un estudio observacional ambispectivo (retrospectivo y prospectivo) realizado en 24 centros de atención primaria y 6 centros sociosanitarios en España.
- El apósito ALLEVYN LIFE se utilizó como apósito primario (35.2%) o secundario (64.8%) durante 4 semanas en lugar de los apósitos previos (espumas, 42.0%; fibras gelificantes, 21.0%).
- Se incluyeron 94 pacientes con 128 heridas y la mayoría tenían edad >70 años (75.8%).
- Las heridas más frecuentes fueron úlceras de pierna (39.8%) o lesiones por presión (31.3%); El 25% de todas las heridas tenían una duración >12 meses.

Resultados

- En la 4ª semana, en comparación con los apósitos previos, el apósito ALLEVYN LIFE ayudó a reducir significativamente:
 - Frecuencia media de cambio de apósito semanal en un 47.1% (Figura; p<0.001)
 - Los cambios de apósito 'cambio de rutina', 'apósito saturado' o 'manchado' se redujeron en un 50%
 - Coste medio semanal en apósitos un 58.7% (Figura; p<0.001)
- Reducción en el área media de la herida con el uso de ALLEVYN LIFE en un 28.3% de 9.9cm² al inicio a 7.1cm² (p<0.001)
 - En el 68.3% de las heridas el área se redujo (>30% para el 85.9% de las heridas)
- La mayoría de los profesionales sanitarios estuvieron de acuerdo que ALLEVYN LIFE era mejor que los apósitos previos en las características evaluadas (media del 69%; 7 características)
- La satisfacción del paciente con la experiencia global del tratamiento de las heridas (44.7%), el control del exudado (46.1%) y el confort (47.0%) mejoraron (muy mala/mala/ adecuada/buena /muy buena) con el apósito ALLEVYN LIFE en comparación con los apósitos previos

47.1%

Reducción de la media de cambio de apósitos por paciente (3.14 vs 1.66; p<0.001)

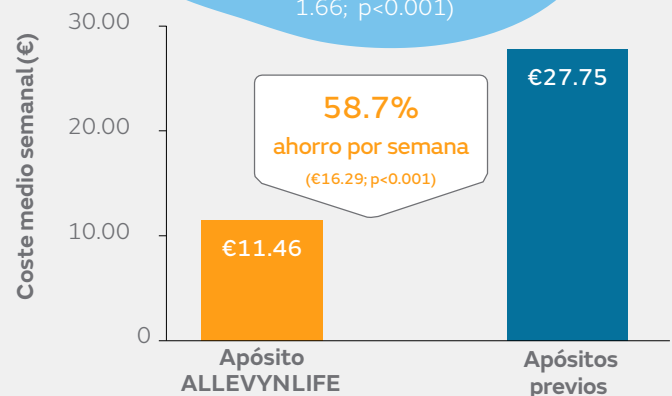


Figura. Coste medio semanal de los apósitos por paciente con ALLEVYN LIFE y los apósitos previos, así como la frecuencia media de cambio de apósitos semanal

Conclusiones

El uso de ALLEVYN LIFE en un entorno comunitario ayudó a reducir significativamente la frecuencia de cambio de apósitos y los costes de los mismos en comparación con los apósitos previos, así como a mejorar la satisfacción de los profesionales sanitarios y del paciente.

Referencias

*Tiscar-González V, Menor-Rodríguez MJ, Rabadán-Sainz C, et al. Clinical and economic impact of wound care using a polyurethane foam multi-layer dressing versus standard dressings on delayed healing ulcers. *Adv Skin Wound Care*. En publicación (con permiso).

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) correspondientes del producto antes de su uso.