


1. Pase las suturas a través del bucle del enhebrador de sutura.



2. Tire del enhebrador de sutura para cargar el implante con las suturas. Repita el paso 1 y 2 hasta que haya cargado todas las suturas que quiera.

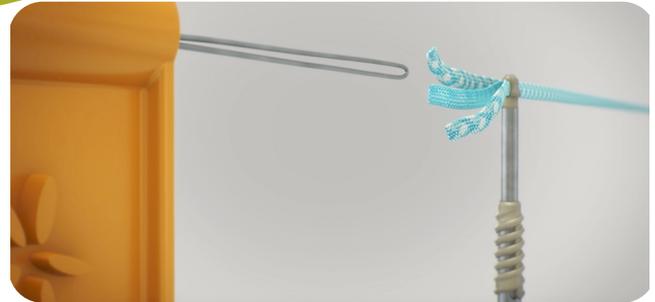

3. Localice el lugar de inserción. Prepare un orificio con el dispositivo de preparación de orificios indicado en las instrucciones de uso.



4. Introduzca el dispositivo en la articulación y estire las suturas si están flojas antes de insertarlo.




5. Inserte el implante distal en el hueso hasta que la primera espira del implante proximal esté situada parcialmente dentro del hueso. Tense las suturas para garantizar una compresión adecuada del tejido. Mantenga fijadas las suturas si así lo desea. Asegúrese de que la primera rosca del anclaje proximal esté parcialmente colocada en el hueso.



6. Baje el implante interno girando la rosca negra más pequeña y más proximal. Gire la rosca en sentido horario hasta que escuche como mínimo un clic.



7. Gire la rosca más grande y más distal (color naranja) en sentido horario para hacer avanzar el implante proximal, hasta que la marca de láser esté al mismo nivel que la superficie del hueso.

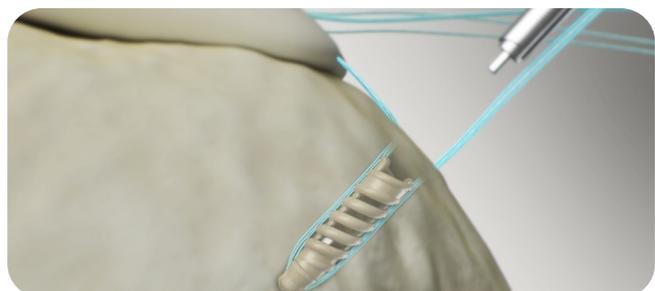

8. Tire hacia atrás del insertador para retirarlo.

Información para pedidos

Anclajes de sutura HEALICOIL® KNOTLESS PK	
N.º de referencia	Descripción
72205137	Anclaje de sutura HEALICOIL KNOTLESS PK, 5,0 mm
72205138	Anclaje de sutura HEALICOIL KNOTLESS PK, 5,0 mm autoterrajante
72205308	Broca 4,75 mm con punta de pala para el anclaje de sutura HEALICOIL KNOTLESS PK, reutilizable
72203710	Terraja 5,5 mm, reutilizable
72203952	Terraja 5,5 mm, desechable
72201915	Punzón cónico, 3,8 mm, reutilizable
72202621	Punzón cónico, 3,8 mm, desechable

Todas las fotos y diagramas se proporcionan solo con fines ilustrativos. Los productos no están a escala.

Para obtener más información sobre la aplicación de cualquiera de los productos mencionados en esta presentación, incluidas sus indicaciones de uso, contraindicaciones e información de seguridad del producto, consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente.

Más información en [smith-nephew.com](https://www.smith-nephew.com)