

+ Evidence in focus

Resumen de la publicación: Tiscar-González V, et al. *Adv Skin Wound Care* (2021)*

Smith+Nephew

El cambio al apósito de espuma ALLEVYN[®] LIFE ayudó a reducir significativamente la frecuencia de cambio de apósito y los costes semanales de apósito, además de mejorar la satisfacción del tratamiento

+ Puntos positivos

En comparación con apósitos previos, ALLEVYN LIFE:




Resumen

- Un estudio observacional ambispectivo (retrospectivo y prospectivo) realizado en 24 centros de atención primaria y 6 centros sociosanitarios en España.
- El apósito ALLEVYN LIFE se utilizó como apósito primario (35,2%) o secundario (64,8%) durante 4 semanas en lugar de los apósitos previos (espumas, 42,0%; fibras gelificantes, 21,0%).
- Se incluyeron 94 pacientes con 128 heridas y la mayoría eran >70 años (75,8%).
- Las heridas más frecuentes fueron úlceras de pierna (39,8%) o lesiones por presión (31,3%); el 25% de todas las heridas eran de una duración >12 meses.

Resultados

- En la 4ª semana, en comparación con los apósitos previos, el apósito ALLEVYN LIFE ayudó a reducir significativamente:
 - La frecuencia media de cambio de apósito semanal en un 47,1% (Figura, p<0,001)
 - Los cambios de apósito 'cambio de rutina', 'apósito saturado' o 'manchado' se redujeron en un 50%
 - El coste medio semanal en apósitos en un 58,7% (Figura, p<0,001)
- Reducción en el área media de la herida con el uso de ALLEVYN LIFE en un 28,3%, de 9,9cm² al inicio a 7,1cm² (p<0.001)
 - En el 68,3% de las heridas el área se redujo (>30% para el 85,9% de las heridas)
- La mayoría de los profesionales sanitarios estuvieron de acuerdo que ALLEVYN LIFE era mejor que los apósitos previos en las características evaluadas (media del 69%, 7 características)
- La satisfacción del paciente con la experiencia global del tratamiento de las heridas (44,7%), el control del exudado (46,1%) y el confort (47,0%) mejoraron (muy mala/mala/ adecuada/buena/ muy buena) con el apósito ALLEVYN LIFE en comparación con los apósitos previos

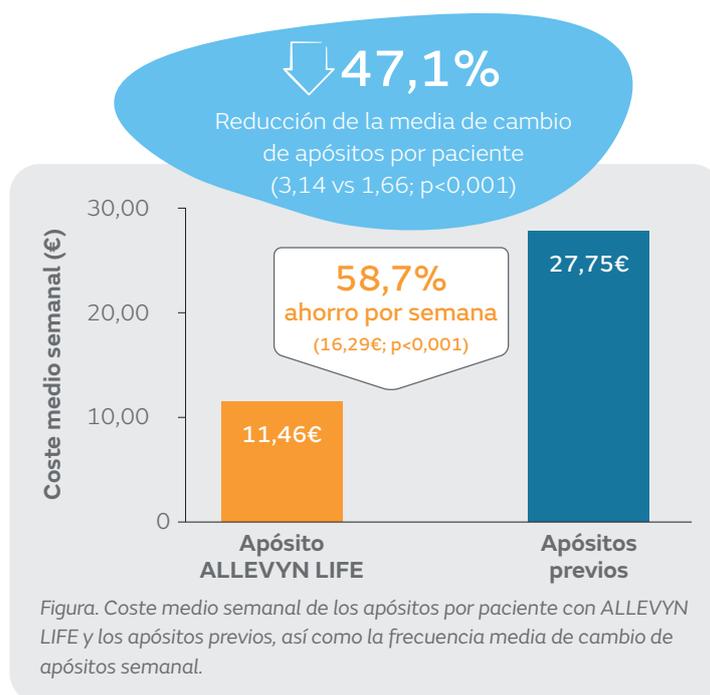

Conclusiones

El uso de ALLEVYN LIFE en un entorno comunitario ayudó a reducir significativamente la frecuencia de cambio de apósitos y los costes de los mismos en comparación con los apósitos previos, así como a mejorar la satisfacción de los profesionales sanitarios y del paciente.

Referencias

*Tiscar-González V, Menor-Rodríguez MJ, Rabadán -Sainz C, et al. Clinical and economic impact of wound care using a polyurethane foam multi-layer dressing versus standard dressings on delayed healing ulcers. *Adv Skin Wound Care*. 2021;34(1):23–30

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) correspondientes del producto antes de su uso.