

Smith & Nephew Record	
ITEM:	IV3000 Ported Generic Leaflet (Global)
CODE:	N/A
THIS SAP/ASSET:	1830 6084 / 25010
PREV SAP/ASSET:	1627 3521 / 36068
DATE:	19.10.2020
REVISION:	02

(NO) smith&nephew

IV3000° PORTED

Fuktresponderende kateter bandasje
Med festestrips og dokumentasjonsett

Beskrivelse
IV3000 er en fuktresponderende film bandasje som er spesielt utformet for kateterfeste og beskyttelse av IV-sted.

Virkningsmåte
IV3000 er laget av en unik REACTIC™-film, som er en svært pustende film med høy gjennomslapnelighet for vandamp sammenlignet med annen filmbandasje-teknologi. Filmen beskytter IV-stedet mot kontaminering fra det eksterne miljøet, som en fysisk barriere mot væsker, partikler og mikrobiell kontaminasjon. IV3000 er påført et allergivennlig klebemiddel. Sterile festestripler til medisinsk bruk og dokumenteringsettet følger også med bandasjen.

Indikasjoner
Ovennevnte produkt er egnet til feste av katetre med port.

Bruksanvisning
Rengjør og tørk nøye av påføringsområdet i samsvar med normale prosedyrer.
1. Fjern festestriplene fra det trykte baksidespapiret (I) og påfør som påkrevet. Pass på at striplene ikke dekker instickstedet. Striplene kan brukes på kateterveggen eller kateterhuden for større sikkerhet, til å feste slanger eller stabilisere kateterlumenere. Fjern baksidespapiret (I) fra bandasjen.
2. Fjern papiret (2) i retningen som er angitt i diagrammet.
3. Plasser bandasjen slik at kateteret sitter riktig i kateteråpningen i bandasjen.
4. Fest den klebende filmdelen av bandasjen over kateteret, og påse at den krydles så lite som mulig.
5. Fjern den trykte, transparente baksiden (3) ved å løfte i klaffen uten lim i enden av bandasjen og trekk diagonalt til baksiden er av.
6. Fjern resten av beskyttelsespapiret (4) og fest stoffdelene av bandasjen over kateterveggen.
7. Form filmen rundt kateteret til bandasjen sitter riktig på it.
8. I samsvar med lokal klinisk protokoll kan informasjon registreres med kulepenn på dokumentasjonsettet for den fjernes fra baksiden (I), og plasseres

Forsiktighetsregler
Brukes kun på klargjort, tørr hud. Ikke legg flere bandaser over hverandre, eller la bandasjer overlappe hverandre.
3. Plasser bandasjen slik at kateteret sitter riktig i kateteråpningen i bandasjen.
4. Fest den klebende filmdelen av bandasjen over kateteret, og påse at den krydles så lite som mulig.
5. Fjern den trykte, transparente baksiden (3) ved å løfte i klaffen uten lim i enden av bandasjen og trekk diagonalt til baksiden er av.
6. Fjern resten av beskyttelsespapiret (4) og fest stoffdelene av bandasjen over kateterveggen.
7. Form filmen rundt kateteret til bandasjen sitter riktig på it.
8. I samsvar med lokal klinisk protokoll kan informasjon registreres med kulepenn på dokumentasjonsettet for den fjernes fra baksiden (I), og plasseres

Produkttilgjengelighet	Indikasjon	Tilgjengelige pakningsstørrelser	Med port
Kode	Størrelse		
66004011	5cm x 6cm	Perifere katetere	Ja
4006	7cm x 9cm	Perifere katetere	Ja
66004009	9cm x 12cm	Perifere og sentrale katetere	Ja
66800512	11cm x 14cm	Sentrale katetere	Ja
Andre tilgjengelige IV3000 produkter	Tilgjengelige pakningsstørrelser	Med port	
Kode	Størrelse	Indikasjon	
4007	6cm x 7cm	Perifere katetere	Nei
4008	10cm x 12cm	Sentrale katetere	Nei
66004005	10cm x 12cm	Sentrale katetere	Nei

■ Smith & Nephew Medical Limited
101 Hesselde Road, Hull HU3 2BN England
©Smith & Nephew
*Varemerker for Smith & Nephew
©Smith & Nephew Ulgivelsesdato 08/2020
www.smith-nephew.com

STERILEEO
Grønt punkt

(FI) smith&nephew

IV3000° PORTED

Kosteuttu läpäisevä kanyyliin kiinnityssidos
Mukana kiinnitysluskat ja tietotarra

Kuvaus
IV3000 on kosteutta läpäisevä läpinäkyvä kanyylinohkeusidee, joka on suunniteltu erityisesti IV-kanyylien kiinnittämiseen ja pistokohdan suojaamiseen.

Käyttö
IV3000 on valmistettu ainutlaatuisesta REACTIC™-kalvosta, joka on hengittävä ja läpäisee vesihöyryä huomattavasti paremmin kuin muut kalvot. Kalvo suojaa IV-pistokohdasta ulkoisilta epäpuhtauksilta estäen nesteiden, huuhtelujen ja mikrobialaisten epäpuhtauksien sisäänpääsyn. IV3000 on käsitelty matala-allergeenisella liima-aineella. Kiinnityssidoksen mukana tulee myös kaksi steriiliä lääkinnälliseen käyttöön hyväksyttyä kiinnitysluskaa ja tietotarra.

Indikaatiot
Ovennevite produkt er egnet til feste av katetre med port.

Käyttöohjeet
Rengasta ja kytkeä alue huolellisesti normaalin käytännön mukaisesti.
1. Poista kiinnitysluskat kuvioituista suojapaperista (I) ja kiinnitä tarpeen mukaan varmistaen, että luskat eivät peitä pistokohdasta. Luskoja voidaan käyttää kanyylien säilykkeissä tai rungossa kiinnityksen varmistamiseksi tai tekujen tai kanyylin luumenien paikalla pitämiseksi. Poista taustapaperi (I) sidoksesta.
2. Poista suojapaperi (2) vetämällä sitä kuvassa osoitetulla suuntaan.
3. Aseta sidos niin, että se on napakasti kiinni kanyylin sisäänmenokohdassa. Älä kiinnitä sidoksen tarttuvia kalvo-osia kanyylin päälle varmistaen samalla, ettei siihen muodostu rypyjä.
5. Poista kuvioitu läpinäkyvä suoja (3) nostamalla sidoksen päissä olevaa paikkalaan ja kiinnitä sen jälkeen uusi sidos. Kuten kaikkien tarttuvien tuotteiden kohdalla, kiinnitä ja irrota varovasti herkkältä tai ohuelta iholta. Jos punitusta tai ärsytystä esiintyy, lopeta käyttöä.
IV3000 on tarkatarkoitteen. Jos sitä käytetään useammalla kuin yhdellä potilaalla, riskitkontaminaation tai infektion vaara on olemassa. Sidospussin avaaminen kyseenaistaist steriilin suojan, mistä systyä käyttämättömiä sidoksia ei saa säilyttää myöhempää käyttöä varten.

Varotoimenpiteitä
Käytä ainoastaan valmistellulla kuivalla iholta. Sidoksia ei saa laittaa päällekkäin tai limittää. Tarkkalle sidosta ja kanyylikohtaa säännöllisesti ja varmista, että sidos on kunnolla kiinni ja että infuusion toimii kunnolla, etenkin kylvyn tai suihkun jälkeen tai jos sidos ja kanyylikohta kastuvat. Jos sidos irtoaa, tarkista, että kanyyli on kunnolla paikkalaan ja kiinnitä sen jälkeen uusi sidos. Kuten kaikkien tarttuvien tuotteiden kohdalla, kiinnitä ja irrota varovasti herkkältä tai ohuelta iholta. Jos punitusta tai ärsytystä esiintyy, lopeta käyttöä.
IV3000 on tarkatarkoitteen. Jos sitä käytetään useammalla kuin yhdellä potilaalla, riskitkontaminaation tai infektion vaara on olemassa. Sidospussin avaaminen kyseenaistaist steriilin suojan, mistä systyä käyttämättömiä sidoksia ei saa säilyttää myöhempää käyttöä varten.

Tuotetiedot	Koko	Indikaatiot	Pakkaus	Aukollinen
Koodi				
66004001	5cm x 6cm	Perifeeriset kanyylit	100 kp/Itk	Kyllä
4006	7cm x 9cm	Perifeeriset kanyylit	50 kp/Itk	Kyllä
66004009	9cm x 12cm	Perifeeriset ja sentraaliset kanyylit	50 kp/Itk	Kyllä
66800512	11cm x 14cm	Sentraaliset kanyylit (inkl. perifeeriset asetetut sentraaliset kanyylit)	25 kp/Itk	Kyllä

Muita saatavana olevia IV3000-tuotteita

Koodi **Koko** **Indikaatiot** **Pakkaus** **Aukollinen**

4007 6cm x 7cm Perifeeriset kanyylit 100 kp/Itk Ei

4008 10cm x 12cm Sentraaliset kanyylit 50 kp/Itk Ei

66004005 10cm x 12cm Sentraaliset kanyylit 10 kp/Itk Ei

■ Smith & Nephew Medical Limited
101 Hesselde Road, Hull HU3 2BN England
©Smith & Nephew'n tavaramerkki
©Smith & Nephew Julkaisupäivämäärä 08/2020
www.smith-nephew.com

STERILEEO
Vihreä piste

(SE) smith&nephew

IV3000° PORTED

Fuktreaktivt kanylförband
Med fästremсор og dokumenteringsetikett

Beskrivning
IV3000 är ett fuktreaktivt transparent kanylförband som är specifikt avsett att möta behoven vid fixering av kanyl och skydd av instickställe.

Användningssätt
IV3000 är tillverkat av en unik REACTIC™-film, som är en ytterst andringsbar film med hög genomsläpningensformåga för vattenånga jämfört med andra filmteknologier. Filmen skyddar IV-instickstället från kontaminering från i den yttre miljön och fungerar som en fysisk barriär mot vätskor, och mikroskopiska partiklar. IV3000 är överdraget med en laggalleren hållmassa. Det medföljer sterila fästremсор av medicinsk kvalitet och en dokumenteringsetikett.

Bruksanvisning
Clean and dry the application area before handling av öppna sår såsom trycksår, brännår eller tagställen, ska OPSITE™ FLEXIGRID™ användas. Fästremсорna och dokumentationsetiketterna är inte indikerade som ersättning för suturer eller andra primära sårlutningsmetoder.

Indikationer
Ovannämnda produkt lämpar sig för att fästa både kanyler med injektionskvalitet och en dokumenteringsetikett.

Kontraindikationer
IV3000 ska endast användas på IV-instickställen. Om sårförband behövs för behandling av öppna sår såsom trycksår, brännår eller tagställen, ska OPSITE™ FLEXIGRID™ användas. Fästremсорna och dokumentationsetiketterna är inte indikerade som ersättning för suturer eller andra primära sårlutningsmetoder.

Säkerhetsanvisningar
Använd endast på torr hud. Lägg inte flera förband över varandra, och låt dem inte överlappa. Övervaka regelbundet förbandet och instickstället för att kontrollera att allt sitter fast och att infusionen sker på rätt sätt, särskilt efter badning eller duschning, eller om det kommit vatten på förbandet och instickstället. Om förbandet lossnar, kontrollera att kanylen sitter ordentligt och applicera sedan på ett nytt. Som vid alla hållande produkter ska appliceringen och avlägsnandet göras varsamt på känslig eller skör hud. Avbryt användningen om det uppkommer rodnad eller sensibilisering. IV3000 är endast avsett för engångsbruk. Om det används på mer än en patient, kan korskontaminering eller infektion uppstå. Om förbandsförpackningen öppnas riskerar man att den sterila barriären bryts. Eventuellt oanvänd förband ska därför inte behållas för användning senare.

Finns i följande storlekar	Indikation	Förpackningsstorlek	Med injektionsport
Artikel nr. Storlek			
66004011	5cm x 6cm	Perifera katetrar	Ja
4006	7cm x 9cm	Perifera katetrar	Ja
66004009	9cm x 12cm	Perifera och centrala katetrar	Ja
66800512	11cm x 14cm	Centrala katetrar (inkl. periferit inlagda centrala venkatetrar)	Ja

Övriga tillgängliga IV3000-produkter	Indikation	Förpackningsstorlek	Med injektionsport
Artikel nr. Storlek			
4007	6cm x 7cm	Perifera katetrar	Nej
4008	10cm x 12cm	Centrala katetrar	Nej
66004005	10cm x 12cm	Centrala katetrar	Nej

■ Smith & Nephew Medical Limited
101 Hesselde Road, Hull HU3 2BN England
*Varumärken som tillhör Smith & Nephew
©Smith & Nephew Texten reviderad den 08/2020
www.smith-nephew.com

STERILEEO
Gröna punkten

(PT) smith&nephew

IV3000° PORTED

Penso para cateter reactivo à humidade
Com tiras de fixação e etiqueta de documentação

Descrição
IV3000 é um penso constituído por uma película transparente reactivo à humidade, especificamente concebido para satisfazer às necessidades de fixação de cateteres e de protecção dos locais de acesso IV.

Modo de acção
IV3000 é fabricado de uma película REACTIC™ original, que é altamente respirável com elevada permeabilidade ao vapor de água em comparação com outras tecnologias de películas. A película protege o local de inserção IV de contaminantes do ambiente exterior actuando como uma barreira física contra líquidos, partículas e contaminantes microbianos. IV3000 está coberto por uma substância adesiva hipoalergénica.

Indicações
O produto acima mencionado é adequado para a fixação de cateteres com porta.

Contraindicações
IV3000 deve ser utilizado apenas em locais de acesso intravenoso. Se for necessário um penso de película para feridas abertas, como úlceras por pressão, queimaduras ou locais dadores, deve utilizar-se OPSITE™ FLEXIGRID™. As tiras de fixação e a etiqueta de documentação não são indicados para substituição de suturas ou de outros métodos de encerramento primário de feridas.

Precauções
Utilize apenas sobre a pele preparada. Não coloque pensos uns sobre os outros nem os sobreponha. Monitorize regularmente o penso e o local do cateter para confirmar a fixação firme e a perfusão adequada contínua, especialmente após o banho ou chuveiro, ou se o penso ou local do cateter ficarem molhados. Se o penso se descolar, verifique para se certificar do posicionamento correcto do cateter e depois aplique um novo penso. Como com todos os produtos adesivos, aplique e remova cuidadosamente de uma pele sensível ou frágil. Se ocorrer vermelhidão ou sensibilização, interrompa a utilização. IV3000 é um produto para utilização única. Se utilizado em mais de um doente, pode ocorrer contaminação cruzada ou infecção. A abertura da embalagem do penso compromete a barreira estável, portanto qualquer penso não utilizado não deve ser conservado para aplicação posterior.

Indicação
Cateteres periféricos
Cateteres periféricos
Cateteres centrais e periféricos
Cateteres centrais (incluindo cateteres centrais com inserção periférica)

Finns i följande storlekar	Indikation	Förpackningsstorlek	Med injektionsport
Artikel nr. Storlek			
66004011	5cm x 6cm	Perifera katetrar	Ja
4006	7cm x 9cm	Perifera katetrar	Ja
66004009	9cm x 12cm	Perifera och centrala katetrar	Ja
66800512	11cm x 14cm	Centrala katetrar (inkl. periferit inlagda centrala venkatetrar)	Ja

Apresentação do produto	Indicação	Disponibilidade	Com porta
Código	Tamanho		
66004011	5cm x 6cm	Cateteres periféricos	Sim
4006	7cm x 9cm	Cateteres periféricos	Sim
66004009	9cm x 12cm	Cateteres centrais e periféricos	Sim
66800512	11cm x 14cm	Cateteres centrais (incluindo cateteres centrais com inserção periférica)	Sim

Outros produtos IV3000 disponíveis

Código **Tamanho** **Indicação** **Disponibilidade** **Com porta**

4007 6cm x 7cm Cateteres periféricos Caixa de 100 Não

4008 10cm x 12cm Cateteres centrais Caixa de 50 Não

66004005 10cm x 12cm Cateteres centrais Caixa de 10 Não

■ Smith & Nephew Medical Limited
101 Hesselde Road, Hull HU3 2BN Inglaterra
*Marcas registradas da Smith & Nephew
©Smith & Nephew Data de emissão 08/2020
www.smith-nephew.com

STERILEEO
Ponto verde

(TR) smith&nephew

IV3000° PORTED

Nome duyarlı kateter pansaman
Sabitleme bantları ve dokümantasyon etiketiyle birlikte

Açıklama
IV3000, kateter sabitleme ve IV yerini koruması ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış, nome duyarlı bir transparan film pansamandır.

Etki şekli
IV3000, diğer film teknolojileriyle karşılaştırıldığında su buharı geçirgenliği yüksek ve hava almayla son derece elverişli, essiz bir REACTIC™ filmden imal edilmiştir. Film, sıvılar, parçacıklı maddeler ve mikrobiel kontaminantlara karşı fiziki bariyer olma özelliğiyle IV giriş yerini, harici çevresel kontaminantlardan korur. IV3000, düşük düzeyde alerjik bir yapışkanla kaplıdır. Ayrıca, pansamanla birlikte sterli, tıbbi kullanıma uygun sabitleme bantları ve dokümantasyon etiketi de verilir.

Kullanıma talimatları
Normal prosedürlere uygun olarak uygulama alanını temizleyin ve iyice kurulaıın.

1. Sabitleme bantlarını baskılı kağıt taşıyıcıdan (I) çıkartın ve bantların giriş yerini kaplamasını sağlayarak gerekliliği göli uygulayın. Bantlar, daha güvenli olmasını sağlamak, hortumları sabitlemek veya kateter lümenlerini sağlamaklaştırmak amacıyla kateter kanallarda veya ağzında kullanılabilir. Taşıyıcı (I) pansamandan çıkartın.
2. Kortuyucu kağıdı (2) diyagramda gösterildiği yönde çıkartın.
3. Kateter, pansaman portuna sıkıca oturacak şekilde pansamanı yerleştirin.
4. Pansamanın yapışkan film kısmını, asgari ölçüde buruşmasını sağlayarak, kateter üzerine yapıştırın.
5. Pansamunun ucundaki yapışkan olmayan kıntıyı kaldırın ve taşıyıcı çıkıncaya kadar caprazlamasına çekerek, baskılı transparan taşıyıcı (3) çıkartın.
6. Geni kalkan koruyucu kağıtları (4) çıkartın ve pansamunun doküma kısmını, kateter kanalları üzerine yapıştırın.

7. Pansaman uygulamasını tamamlamak için kateter etrafındaki filme sıkı verin.
8. Lokal klinik protokoller uyanınca bilgiler, taşıyıcıdan (I) çıkartılı hastanın notlarına ekulmadan önce, cilt üzerindeki veya pansaman üzerindeki dokümantasyon etiketine (kateter girişi yerini

Takdim şekli	Ebat	Endikasyon	Ticari takdim şekli	Portlu mu
Kod				
66004011	5cm x 6cm	Periferik kateterler	100 lük kutu	Evet
4006	7cm x 9cm	Periferik kateterler	100 lük kutu	Evet
66004009	9cm x 12cm	Periferik ve santral kateterler	50 lük kutu	Evet
66800512	11cm x 14cm	Santral kateterler (periferik yerleştirilmiş santral kateterler dahil)	25 lük kutu	Evet

Mevcut diğer IV3000 ürünleri

Kod **Ebat** **Endikasyon** **Ticari takdim şekli** **Portlu mu**

4007 6cm x 7cm Periferik kateterler 100 lük kutu Hayır


4008 10cm x 12cm Santral kateterler 50 lük kutu Hayır

66004005 10cm x 12cm Santral kateterler 10 lük kutu Hayır

■ Smith & Nephew Medical Limited
101 Hesselde Road, Hull HU3 2BN İngiltere tarafından üretilmiştir
*Smith & Nephew Ticari Markaları
©Smith & Nephew Sunam tarihi 08/2020
www.smith-nephew.com

STERILEEO
Yeşil Nokta

ITEM:	
CODE:	
THIS SAP/ASSET:	
PREV SAP/ASSET:	
DATE:	
REVISION:	

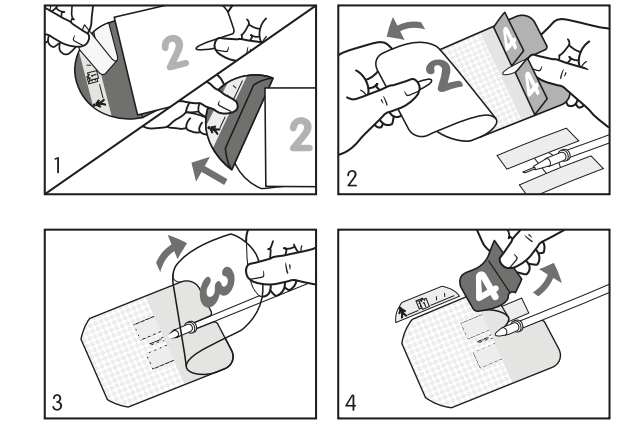

UK Smith & Nephew,
Crosby Park, Building 5, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire WD18 8YE,
Tel: 0800 517 573.

AUSTRALIA Smith & Nephew Pty Ltd,
85 Waterloo Road, North Ryde,
NSW 2113, Tel: (02) 9587 3999.

AUSTRIA Smith & Nephew GmbH,
Concorde Business Park C3,
A-2320 Schwechat. Tel: +43 (0) 707 91 02.

BELGIUM Smith & Nephew N.V.-S.A.,
Hector Henneauxlaan 366 - 1930 Zaventem,
Tel: +45 45 80 61 00.

CANADA Smith & Nephew Inc.,
2280 Argenta Road, Mississauga,
ON L5H 4H8. Tel: 1 800 463 7439.

CHINA Smith & Nephew Ltd.,
15F, One Finance Place Office Building,
No.669 Xinhua Road, Jing'an District,
Shanghai, China Tel: +86 (021) 23303000

DENMARK Smith & Nephew A/S,
Slotsmarken 14, 2670 Hørsholm,
Tel: +45 45 80 61 00.

EASTERN EUROPE Smith & Nephew GmbH,
Concorde Business Park C3,
A-2320 Schwechat. Tel: +43 (0) 707 91 02.

FINLAND Smith & Nephew Oy,
Ahtieitie 12, C, 00510 Vantaa, +358 207 866 300.

FRANCE Smith & Nephew SAS,
40/52 boulevard du Parc,
F-92200 Neuilly Sur Seine,
Tel: (852) 2648 7700.

GERMANY Smith & Nephew GmbH,
Friesenweg 4/ Haus 21, 22763 Hamburg, Tel: 040 87974-0.

GREECE Costas A. Papaellinas (Hellas) SA,
Fouclis Galatari, 2-4, 08970 Sant Joan Despi,
PO Box 182, 19400 Koropi. Tel: 662 6201-7.

HONG KONG Smith & Nephew Ltd.,
Unit 813-818, 8/F, Delta House,
3 On Yu Street, Shaolin, N.T.
Tel: (852) 2468 7700.

INDIA Smith & Nephew HealthCare Pvt. Ltd.
B-501-509, Dynasty Business Park,
Ancheri-Kurli Road, Ancheri (E),
Mumbai-400059. Tel: 022 4003 5090.

IRELAND Smith & Nephew Limited,
Carriga Court, George's Avenue,
Blackrock, Co. Dublin, Tel: 01-217 0444.

ITALY Smith & Nephew S.r.l.,
Dele Capitani 2A, 20864 Agrigiano (MB),
Tel: +39 039 60941.

JAPAN Smith & Nephew KK,
2-4-1 Shiba Kenjo, Minato-ku,
Tokyo 105-0001 Japan. Tel: 03-5403-8930.

KOREA Smith & Nephew Ltd., 13F,
GANGNAM Tower 517, Yeongdong-daeo,
Aseongnam-gu, Seoul, Korea (135-798).
Tel: 2 6001 7575.

MALAYSIA Smith & Nephew HealthCare Sdn.
Bhd., Suite 11 01B & 11 02, Level 11, Menara
Salle 600, Fort Worth, TX 76109.

MALTA Cherbundo Ltd,
Dele Capitani, Sliema Road, Gzira,
Tel: 21 343270.

MEXICO Smith & Nephew,
SA de CV, Patricio Sanz No. 442,
Colonia del Valle, C.P. 03000,
Mexico D.F., Tel: 53 40 22 60.

MIDDLE EAST Smith & Nephew FZE,
4th Floor National Bank of Abu Dhabi Building,
Al Jazari Building 47, Dubai Healthcare City -
District 8, PO Box 9715, Dubai, U.A.E.
Tel: 971 4 429911.

NETHERLANDS Smith & Nephew Nederland CV,
Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp,
Tel: +31 (0) 20 6543999.

NEW ZEALAND Smith & Nephew Limited,
Unit A, 36 Hillside Road, Wair

(FR)



IV3000° PORTED

Pansement pour fixation de cathéter réactif à l'humidité
Avec bandelettes de fixation et étiquette de documentation

Description
IV3000 est un film transparent qui réagit à l'humidité, spécialement conçu pour répondre aux besoins des professionnels en matière de fixation de cathétèrs et de protection des sites intraveineux.

Mode d'action
IV3000 est fabriqué à partir d'un film REACTIC™ unique, film hautement perméable à l'air et à la vapeur d'eau, comparé aux autres technologies de film. Le film protège le site d'insertion intraveineuse des contaminants environnementaux externes, en tant que barrière physique contre les liquides, matières particulaires et contaminants microbiens. IV3000 est revêtu d'un adhésif très peu allergénique. Des bandelettes de fixation stériles de qualité médicale et une étiquette de documentation sont également fournies avec le pansement.

Mode d'emploi
Nettoyez et séchez avec soin la zone d'application, conformément aux procédures normales.
Enlevez les bandelettes de fixation du support imprimé (I) et les appliquez si nécessaire, en s'assurant que les bandelettes ne recouvrent pas le site d'insertion. Les bandelettes peuvent être placées sur les ailettes ou le raccord du cathéter pour une sécurité améliorée, afin de fixer la tubulure ou de stabiliser les lumières du cathéter.
Oter le film protecteur (I) du pansement.
2. Retirez le papier protecteur (2) dans le sens indiqué sur le schéma.
3. Placez le pansement en veillant à ce que le cathéter s'embôle parfaitement dans la partie fendue du pansement.
4. Faire adhérer la partie « film » du pansement sur le dessus du cathéter en limitant au maximum les plis.

5. Retirez le support transparent imprimé (3) en soulevant la languette non adhésive à l'extrémité du pansement et en tirant en diagonale, jusqu'à ce que le support soit entièrement retiré.
6. Retirer les papiers protecteurs restant (4) et coller les parties non tissées du pansement autour des ailettes du cathéter.
7. Terminer l'application en lissant le film afin qu'il moule parfaitement le cathéter.
8. Conformément aux protocoles cliniques locaux, l'information peut être consignée avec un stylo à bille sur l'étiquette de documentation, avant de retirer le support (I) et d'être placée dans le dossier du patient, collée sur sa peau ou sur le pansement (en prenant garde de ne pas masquer le site d'insertion du cathéter).
9. Si vous utilisez plus d'un pansement, ne pas faire chevaucher les pansements.
10. Retirez le pansement en décollant le film puis en élevant le pansement parallèlement à la peau du patient, tout en stabilisant la peau du patient et le cathéter de l'autre main. Vous pouvez aussi utiliser une lingette imbibée d'alcool pour casser l'adhésivité du film. Si la peau est particulièrement fragile, vous pouvez utiliser de l'eau chaude savonneuse afin de casser l'adhésivité du film et faciliter le retrait du pansement.

Indications
Le produit mentionné(fendu convient à la fixation des cathétèrs.

Contre-indications


IV3000 doit être utilisé exclusivement sur les sites intraveineux. Si un film est nécessaire pour recouvrir des plaies ouvertes, telles que des escarres, brûlures ou sites donneurs de greffes, OPSITE™ FLEXIGRID® doit être utilisé. Les bandelettes de fixation et l'étiquette de documentation ne sont pas indiquées pour remplacer des sutures ou autres méthodes de fermeture primaires de plaies.

Précautions

Utilisez uniquement sur une peau sèche préparée. Ne pas superposer les pansements, ni les faire se chevaucher. Vérifiez régulièrement le pansement et le site du cathéter pour confirmer la sécurité de la fixation ainsi qu'une perfusion continue et appropriée, en particulier après le bain, la douche, ou si le pansement et le site du cathéter sont mouillés. Si le pansement se décolle, s'assurer que le cathéter est bien en place, puis appliquez un nouveau pansement. Comme avec tous les produits adhésifs, appliquez et enlevez avec précaution, sur les peaux sensibles ou fragiles. Si une sensibilisation ou des rougeurs apparaissent, arrêtez l'utilisation. IV3000 est un produit conçu exclusivement pour usage unique. L'utilisation chez plus d'un patient peut entraîner une contamination croisée ou une infection. L'ouverture du sachet contenant le pansement compromet la barrière stérile aussi tout pansement non utilisé ne doit pas être gardé pour une application ultérieure.

Présentation Code	Dimensions	Indication	Présentation	Fendu
46004011	5cm x 6cm	Cathétèrs périphériques	Carton de 100	Oui
4006	7cm x 9cm	Cathétèrs périphériques	Carton de 100	Oui
66004009	9cm x 12cm	Cathétèrs centraux et périphériques	Carton de 50	Oui
66800512	11cm x 14cm	Cathétèrs centraux (y compris cathétèrs centraux insérés périphériquement)	Carton de 25	Oui
Autres produits IV3000 disponibles				
Code	Dimensions	Indication	Présentation	Fendu
4007	6cm x 7cm	Cathétèrs périphériques	Carton de 100	Non
4008	10cm x 12cm	Cathétèrs centraux	Carton de 50	Non
66004005	10cm x 12cm	Cathétèrs centraux	Carton de 10	Non

Smith & Nephew Medical Limited
101 Hessele Road, Hull HU3 2BN Angleterre
*Marques de commerce de Smith & Nephew
©Smith & Nephew Date d'édition 08/2020
www.smith-nephew.com

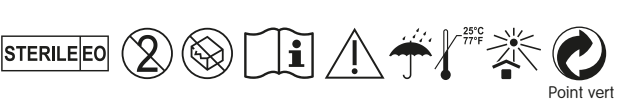

Point vert

(DE)



IV3000° PORTED

Auf Feuchtigkeit reagierender Katheterverband
Mit Fixierstreifen und Beschriftungsfeld

Beschreibung
IV3000 ist ein transparenter Folienverband, der auf Feuchtigkeit reagiert und für die speziellen Bedürfnisse bei der Katheterfixierung und dem Schutz von Infusionsstellen entwickelt wurde.

Wirkungsweise
IV3000 wird aus einer einzigartigen REACTIC™ Folie hergestellt, einer höchst atmungsaktiven Folie, die im Vergleich zu herkömmlichen Folien eine wesentlich höhere Wasserdurchlässigkeit besitzt. Als physische Abwehrschicht gegen Flüssigkeiten, Feinstaub und mikrobielle Schadstoffe stellt die Folie einen Schutz der Infusionsstelle gegen externe verunreinigende Substanzen dar. IV3000 ist mit einem hypoallergenen Haftmittel versehen. Der Verband wird mit sterilen medizinischen Fixierstreifen und einer Beschriftungsfeld geliefert.

Indications
Le produit mentionné(fendu convient à la fixation des cathétèrs.

Contre-indications

Anwendungshinweise
Anwendungsbereich reinigen und sorgfältig trocknen.
1. Fixierstreifen von den bedruckten Trägerpapier (I) abziehen und nach Bedarf anlegen, dabei sicherstellen, dass die Streifen die Punktsionstelle nicht abdecken. Die Streifen können für gesteigerte Sicherheit an den Katheterlügen oder dem Katheterschluss verwendet werden, um Röhrchen zu fixieren oder Katheterlumen festzuhalten.
Trägerfolie (I) vom Verband abziehen.
2. Schutzpapier (2) in der im Schaubild dargestellten Richtung abziehen.
3. Platzieren Sie das Band so, dass der Katheter gut passend im Zuspitzort des Verbands sitzt.
4. Klebefolie des Verbands über den Katheter kleben und dabei minimale Zerknitterung sicherstellen.
5. Bedruckte transparente Trägerfolie (3) durch Anheben des nichtklebenden Randes am Ende des Verbands und Ziehen in diagonaler Richtung abziehen, bis die Trägerfolie entfernt ist.
6. Restliche Schutzpapiere (4) abziehen und Gewebeteile des Verbands über die Flügel des Katheters kleben.
7. Zum Abschluss des Anlegens des Verbands Folie um Katheter herum festdrücken.
8. Gemäß örtlicher klinischer Protokolle können Einzelheiten mit einem Kugelschreiber auf dem Beschriftungsfeld festgehalten werden, bevor dieses von der Trägerfolie (I) abgezogen und in der Patientenakte, auf der Haut oder auf dem Verband angebracht wird (ohne die Sicht

Nur auf gereinigter und trockener Haut verwenden. Verbände nicht übereinander anlegen oder überlappen lassen. Verband und Punktionsstelle regelmäßig auf festen Sitz und korrektes Funktionieren der Infusion überprüfen, insbesondere nach dem Baden oder Duschen oder wenn der Verband und die Kathetereintrittsstelle nass werden. Falls sich der Verband löst, den korrekten Sitz des Katheters überprüfen und anschließend einen neuen Verband anlegen. Wie bei allen klebenden Produkten ist der Verband auf empfindlicher oder brüchiger Haut besonders vorsichtig anzulegen und zu entfernen. Bei Rötung oder Sensibilisierung ist der Gebrauch einzustellen. IV3000 ist ein Produkt zur einmaligen Verwendung. Bei Verwendung an mehr als einem Patienten kann es zu Kreuzkontamination oder Infektion kommen. Das Öffnen der Verbandsverpackung beeinträchtigt die sterile Schutzschicht, so dass unbenutztes Verbandmaterial nicht zur späteren Verwendung aufbewahrt werden sollte.

Handelsformen	Abmessung	Anwendungsgebiet	Stck./Pkg.	Geschlitzt
Best.-Nr.		Periphäre Katheter	100	Ja
66004011	5cm x 6cm	Periphäre Katheter	100	Ja
4006	7cm x 9cm	Periphäre und zentrale Katheter	50	Ja
66004009	9cm x 12cm	Zentrale Katheter (einschließlich zentraler Katheter zur peripheren Einführung)	25	Ja
66800512	11cm x 14cm			

Sonstige erhältliche IV3000 Produkte	Abmessung	Anwendungsgebiet	Stck./Pkg.	Geschlitzt
Best.-Nr.		Periphäre Katheter	100	Nein
4007	6cm x 7cm	Periphäre Katheter	100	Nein
4008	10cm x 12cm	Zentrale Katheter	50	Nein
66004005	10cm x 12cm	Zentrale Katheter	10	Nein

Smith & Nephew Medical Limited
101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England
*Warenzeichen von Smith & Nephew
©Smith & Nephew Ausgabedatum 08/2020
www.smith-nephew.com



Grüner Punkt

(ES)



IV3000° PORTED

Apósito para catéter sensible a la humedad
Con tiras de fijación y etiqueta de recogida de datos

Descripción
IV3000 es un apósito con un film transparente sensible a la humedad, específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de fijación del catéter y proteger la zona de punción.

Modo de acción
IV3000 está fabricado con un film especial de REACTIC™, altamente transpirable y con una alta permeabilidad al vapor de agua en comparación con otras tecnologías de films. El film protege la zona de punción de los contaminantes medio ambientales externos al ofrecer una barrera física contra los líquidos, partículas y contaminantes microbianos. IV3000 posee un adhesivo que no irrita ni sensibiliza la zona. El apósito también incluye tiras de fijación estériles de calidad médica y una etiqueta de recogida de datos.

Indicaciones
El producto arriba mencionado está indicado para la fijación de catéteres con puerto.

Contraindicaciones

IV3000 solamente debe utilizarse en zonas de punción. Si es necesario utilizar un apósito para el tratamiento de heridas abiertas como úlceras por presión, quemaduras o zonas donantes, utilice el apósito OPSITE™ FLEXIGRID®. Las tiras de fijación y la etiqueta de recogida de datos no están indicadas para sustituir las suturas u otros métodos primarios de cierre de heridas.

Modo de empleo
Limpiar y secar completamente la zona de aplicación conforme a los procedimientos normales.
1. Retirar las tiras de fijación del protector (I) y aplicarlas según sea necesario, comprobando que las tiras no cubran la zona de inserción. Para mayor seguridad las tiras pueden utilizarse sobre las lengüetas o centro del catéter para fijar el tubo o estabilizar las luces del catéter. Retirar el protector (I) del apósito.
2. Retirar el protector (2) siguiendo la dirección indicada en el diagrama.
3. Colocar el apósito sobre el centro del catéter.
4. Adherir la cara adhesiva del apósito al catéter evitando que se formen arrugas.
5. Retirar el protector impreso transparente (3) levantando la lengüeta no adhesiva en el extremo del apósito y estrizando diagonalmente hasta retirar el protector.

6. Retirar los protectores restantes (4) y adherir las secciones de tejido del apósito sobre las alas del catéter.
7. Moldear el film alrededor del catéter para completar la aplicación del apósito.
8. Según los protocolos clínicos locales la información puede registrarse en la documentación de recogida de datos utilizando un bolígrafo en la etiqueta de recogida de datos antes de retirarla del soporte (I) y colocarla en el expediente del paciente, en la piel o en el mismo apósito (sin cubrir la zona de inserción del catéter).
9. Cuando se utilice más de un apósito, evitar que se solapen.
10. Retirar el apósito estrizando de la sección de tejido del apósito y estirar el film paralelo a la piel del paciente mientras se estabiliza la piel del paciente y el catéter con la otra mano.
Alternativamente, utiliza una toallita humedecida con alcohol para eliminar el adhesivo. Si la piel es especialmente frágil puede utilizarse agua templada jabonosa para eliminar el adhesivo y facilitar la retirada del apósito.

Precauciones
Usar sobre piel seca solamente. No aplicar los apósitos uno encima de otro ni dejar que se solapen. Supervise periódicamente el apósito y la zona de punción para confirmar que el apósito está fijado correctamente y se produce una infusión continua adecuada. Especialmente después del baño, ducha, o si el apósito o catéter se mojan. Si el apósito se despega, comprobar que el catéter está correctamente colocado y aplicar un apósito nuevo. Al igual que con todos los productos adhesivos, aplicar y retirar con cuidado de la piel sensible o frágil. Si se observa enrojecimiento o sensibilidad en la piel discontinuar su uso. IV3000 es un producto de un solo uso. Si se utiliza en más de un paciente pueden surgir lugar a contaminación cruzada o infecciones. Abrir el envase del apósito compromete la barrera estéril y por lo tanto los apósitos no utilizados no deben guardarse para su posterior aplicación.

Disponibilidad	Producto	Código	Tamaño	Indicación	Disponibilidad	Puerto
		66004011	5cm x 6cm	Catéteres periféricos	Caja de 100	Si
		4006	7cm x 9cm	Catéteres periféricos y centrales	Caja de 50	Si
		66004009	9cm x 12cm	Catéteres centrales de inserción periférica	Caja de 25	Si

Confezione disponibili	Dimensione	Indicazioni	Confezione	Ported
66004011	5cm x 6cm	Cateteri periferici	100 medicazioni	Si
4006	7cm x 9cm	Cateteri periferici	100 medicazioni	Si
66004009	9cm x 12cm	Cateteri periferici e centrali	50 medicazioni	Si
66800512	11cm x 14cm	Cateteri centrali inseriti in modo periferico (PICC)	25 medicazioni	Si

Altri prodotti IV3000 disponibili	Codice	Dimensione	Indicazioni	Confezione	Ported
4007	6cm x 7cm	Cateteri periferici	100 medicazioni	No	No
4008	10cm x 12cm	Cateteri centrali	50 medicazioni	No	No
66004005	10cm x 12cm	Cateteri centrali	10 medicazioni	No	No

Smith & Nephew Medical Limited
101 Hessele Road, Hull HU3 2BN Inghilterra
*Marcas registradas de Smith & Nephew
©Smith & Nephew Fecha de emisión 08/2020
www.smith-nephew.com

Smith & Nephew Medical Limited
101 Hessele Road, Hull HU3 2BN Inghilterra
*Marchio di Smith & Nephew
©Smith & Nephew Data di revisione 08/2020
www.smith-nephew.com



Punto verde

(IT)



IV3000° PORTED

Medicazione idroreattiva per fissaggio catetere
Con strisce di fissaggio ed etichetta

Descrizione
IV3000 è una medicazione trasparente idroreattiva in film, creata per rispondere in modo specifico ai requisiti di fissaggio dei cateteri e di protezione del sito IV.

Meccanismo d'azione
IV3000 è costituito da una speciale pellicola, REACTIC™, unica perché altamente traspirante e significativamente più permeabile al vapore acqueo rispetto alle altre tecnologie di costruzione di film. La pellicola protegge il sito d'inserzione IV da contaminanti esterni dato che agisce come una barriera fisica contro liquidi, particelle e contaminanti microbici. IV3000 è spalmato con un adesivo ipoallergenico. Con il prodotto sono fornite strisce medicali sterili di fissaggio e un'etichetta per documentazione.

Indicazioni
Il prodotto arriba mencionado está indicado para la fijación de catéteres con puerto.

Contraindicaciones

IV3000 solamente debe utilizarse en zonas de punción. Si es necesario utilizar un apósito para el tratamiento de heridas abiertas como úlceras por presión, quemaduras o zonas donantes, utilice el apósito OPSITE™ FLEXIGRID®. Las tiras de fijación y la etiqueta de recogida de datos no están indicadas para sustituir las suturas u otros métodos primarios de cierre de heridas.

Modo de empleo
Limpiar y secar completamente la zona de aplicación secondo le normali procedure.
1. Rimuovere le strisce di fissaggio dal supporto in carta stampato (I) ed applicarle come necessario, assicurandosi che le strisce non coprano il sito di inserzione. Le strisce possono essere usate sulle alette del catetere o sul connettore del catetere per aumentare la sicurezza, per ancorare i tubi o per stabilizzare i lumi del catetere. Rimuovere il supporto (I) dalla medicazione.
2. Rimuovere la carta di protezione (2) nella direzione indicata nel diagramma.
3. Posizionare la medicazione in modo che il catetere sia perfettamente posizionato nella fessura della medicazione.
4. Far aderire la parte adesiva della medicazione sopra il catetere evitando il più possibile increspature, ripiegamenti e grinze.
5. Asportare il supporto trasparente stampato (3) sollevando la striscia non adesiva in fondo alla medicazione e tirando in diagonale fino a rimuovere il supporto.


6. Rimuovere le restanti carte protettive (4) e far aderire le parti a tessuto della medicazione sopra le alette del catetere.
7. Sagomare il film attorno al catetere per completare l'applicazione della medicazione.
8. A seconda dei protocolli clinici locali, è possibile annotare le informazioni con una penna a sfera sull'etichetta prima di asportarla dal supporto (I) e metterla nella cartella del paziente, sulla cute o sulla medicazione (facendo attenzione a non oscurare la visibilità del sito d'inserzione del catetere).
9. Se è necessario usare più di una medicazione, assicurarsi che non si sovrappongano.
10. Per rimuovere la medicazione, tirare la sezione in tessuto della medicazione, poi allentare il film tirandolo parallelamente alla cute del paziente mentre con l'altra mano si stabilizza il catetere e la cute del paziente. In alternativa si può usare una salvietta imbevuta d'alcol per staccare l'adesivo. In caso di cute particolarmente fragile si consiglia di usare acqua tiepida e sapone per staccare l'adesivo e facilitare la rimozione della medicazione.

Disponibilità	Prodotto	Codice	Dimensione	Indicazioni	Disponibilità	Puerto
		66004011	5cm x 6cm	Cateteri periferici	Caja de 100	Si
		4006	7cm x 9cm	Cateteri periferici	Caja de 100	Si
		66004009	9cm x 12cm	Cateteri periferici e centrali	Caja de 50	Si
		66800512	11cm x 14cm	Cateteri centrali inseriti in modo periferico (PICC)	Caja de 25	Si

Confezione disponibili	Dimensione	Indicazioni	Confezione	Ported
66004011	5cm x 6cm	Cateteri periferici	100 medicazioni	Si
4006	7cm x 9cm	Cateteri periferici	100 medicazioni	Si
66004009	9cm x 12cm	Cateteri periferici e centrali	50 medicazioni	Si
66800512	11cm x 14cm	Cateteri centrali inseriti in modo periferico (PICC)	25 medicazioni	Si

Altri prodotti IV3000 disponibili	Codice	Dimensione	Indicazioni	Confezione	Ported
4007	6cm x 7cm	Cateteri periferici	100 medicazioni	No	No
4008	10cm x 12cm	Cateteri centrali	50 medicazioni	No	No
66004005	10cm x 12cm	Cateteri centrali	10 medicazioni	No	No

Smith & Nephew Medical Limited
101 Hessele Road, Hull HU3 2BN Inghilterra
*Marchio di Smith & Nephew
©Smith & Nephew Data di revisione 08/2020
www.smith-nephew.com

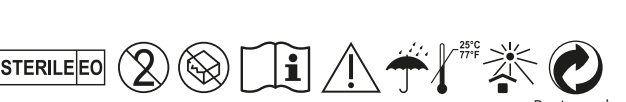

Punto verde

(NL)



IV3000° PORTED

Hoge waterdampdoorlaatbare infuusfolie met fixatiestrips en documentatielabel

Beschrijving
IV3000 is een waterdampdoorlaatbare, transparante folie die speciaal ontwikkeld is voor een veilige fixatie van katheters en om de insteekopening droog te houden.

Werking
IV3000 is vervaardigd uit de unieke REACTIC™ folie: een ademende folie die meer doorlaatbaar is voor waterdamp dan folies die op een andere technologie zijn gebaseerd. De folie vormt een barrière voor vocht, vaste deeltjes en microbiële contaminanten, waardoor de insteekopening beschermd wordt tegen contaminatie van buitenaf. IV3000 is voorzien van een hypoallergene kleeflaag. De folie omvat eveneens sierleie voor medische doeleinden geschikte fixatiestrips en een documentatielabel.

Indicaties
Het bovengenoemde product is geschikt voor de fixatie van katheters met poort.

Gebruiksaanwijzing

Maak het applicatiegebied grondig schoon en droog volgens de normale procedures.

1. Verwijder de fixatiestrips van het bedrukte dragermateriaal (I) en breng aan indien nodig. Zorg ervoor dat de strips de insteekopening niet bedekken. De strips kunnen worden gebruikt op de kathetervleugels of het aansluitstuk voor extra veiligheid, om buisjes te fixeren of om katheterluminia te stabiliseren. Verwijder de drager (I) van de folie.

2. Verwijder het beschermpapier (2) in de in het diagram aangegeven richting.
3. Positioneer de folie zodat de katheter stevig in de poort valt.
4. Kleef het de folie over de katheter en zorg er daarbij voor dat er zo weinig mogelijk rimpels in komen.
5. Verwijder de bedrukte transparante drager (3) door het niet klevende gedeelte aan het eind van de folie op te tillen en diagonaal weg te trekken tot de drager verwijderd is.

6. Verwijder de overige beschermepapieren (4) en kleef de stoffen gedeelten van de folie over de vleugels van de katheter.
7. Breng ten slotte de folie aan rond de katheter. Deze is nu aangebracht.
8. In overeenstemming met lokale klinische protocollen. Kan informatie worden genoteerd met een balpen op het documentatielabel vóór verwijdering van de drager (I) en dit vervolgens in de patiëntennotities plaatsen, op de huid of op de folie (zorg ervoor dat de latere datum.

Beschikbaarheid van het product	Artikelnummer	Afmeting	Indicatie	Verpakking	Poort
	66004011	5cm x 6cm	Perifere katheters	Doos van 100	Ja
	4006	7cm x 9cm	Perifere katheters	Doos van 100	Ja
	66004009	9cm x 12cm	Perifere en centrale katheters	Doos van 50	Ja
	66800512	11cm x 14cm	Centrale katheters (waaronder perifere ingebrachte centrale katheters)	Doos van 25	Ja

Andere beschikbare IV3000 producten	Artikelnummer	Afmeting	Indicatie	Verpakking	Poort
4007	6cm x 7cm	Perifere katheters	Doos van 100	Nee	Nee
4008	10cm x 12cm	Centrale katheters	Doos van 50	Nee	Nee
66004005	10cm x 12cm	Centrale katheters	Doos van 10	Nee	Nee

Smith & Nephew Medical Limited
101 Hessele Road, Hull HU3 2BN Verenigd Koninkrijk
*Handelsmerken van Smith & Nephew
©Smith & Nephew Aanmaakdatum 08/2020
www.smith-nephew.com



Greenpoint

(GR)



IV3000° PORTED

Επίδεσμος που ανθίσταται στην υγρασία του καθετήρα
Με ταινίες στερέωσης και ετικέτα τεκμηρίωσης

Περιγραφή
Το IV3000 είναι ένας επίδεσμος που ανθίσταται στην υγρασία διαφανούς μειβρόνης, ειδικά σχεδιασμένος για να καλύπτει τις ανάγκες της καθήλωσης του καθετήρα και της προστασίας του χώρου IV.

Μέθοδος δράσης
Το IV3000 είναι κατασκευασμένο από μια μοναδική REACTIC™ ταινία, η οποία είναι μια εξαιρετικά πορώδης ταινία με υψηλή διαπερατότητα σε υδρατμούς σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες ταινιών. Η ταινία προστατεύει τη θέση εισαγωγής του IV από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς ρύπους ως ένα φυσικό εμπόδιο για τα υγρά, τα αιωρούμενα σωματίδια και τους ρύπους μικροβίων. Το IV3000 σφραγίζεται με κόλλα χαμηλής αλλεργίας. Αποστερωμένες ιατρικές ταινίες ποιότητας για στερέωση και μια ετικέτα τεκμηρίωσης παρέχονται επίσης μαζί με τον επίδεσμο.

Ενδείξεις
Ο επίδεσμος προϊόν είναι κατάλληλο για τη στερέωση των καθεήρων εισόδου.

Αντενδείξεις
Το IV3000 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους IV. Αν χρειαστεί, ένας επίδεσμος ταινίας για τις ανοικτές πηγές, όπως κατόπιν εντοπισμού ή προληπτικά δοτών, το OPSITE™ FLEXIGRID® πρέπει να χρησιμοποιείται. Οι ταινίες στερέωσης και η ετικέτα τεκμηρίωσης δεν ενδεδικνυται ως υποκατάστατο για ράμματα ή άλλες πρωτογενείς μεθόδους για το κλείσιμο των πληγών.

Προφυλάξεις
Χρησιμοποιήστε το μόνο σε προετοιμασμένο ήπιο δέρμα. Μην τοποθετείτε τον επίδεσμο, και μην αφήνετε τους επίδεσμους να έλθουν σε επαφή με άλλους επίδεσμους ή με άλλα αντικείμενα. Σε τaktά χρονικά διαστήματα, να παρακολουθείτε τον επίδεσμο και τον χώρο του καθετήρα για να επιβεβαιώσετε την ασφαλή προσαρμογή και τη συνεχή κανονική έγχυση, ειδικά μετά το μπάνιο, το ντους ή εάν ο επίδεσμος και ο χώρος του καθετήρα βρακούν. Εάν οι επίδεσμοι εκτο