


+ ALLEVYN[◇] LIFE Medicazione con indicatore di cambio EXUMASK[◇]

Performance affidabili, che permettono di risparmiare tempo e denaro.¹⁻⁶

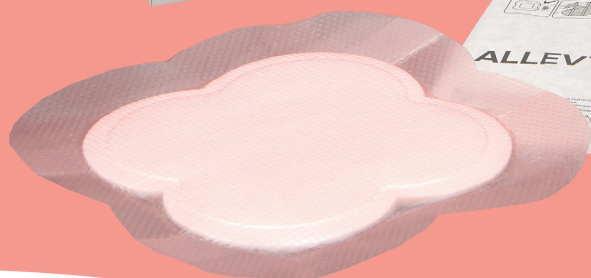

SmithNephew

ALLEVYN[◇] LIFE

Medicazione in schiuma idrocellulare
con indicatore di cambio EXUMASK[◇]



www.smith-nephew.com/allevyn



Ci siamo impegnati a ridurre l'utilizzo della carta. Scannerizza il QR code per scaricare altri contenuti in formato digitale.



BASSA - ALTA
ASSORBENZA



Meno spreco
+ più cura

ALLEVYN[®] LIFE è una medicazione **all-in-one** per la **gestione** delle ferite e la **prevenzione** delle lesioni da pressione.¹⁻⁶

Caratteristiche e vantaggi



Assorbente⁷⁻⁹

La schiuma idrocellulare bilancia in modo innovativo l'assorbimento e la ritenzione per creare un ambiente umido per la guarigione delle ferite¹⁰⁻¹⁴, minimizzando il rischio di macerazione.¹⁰⁻¹³



Protettivo^{6,7}

Lo strato esterno traspirante e impermeabile⁷⁻⁹ funge da barriera batterica.¹⁵



Delicato^{11,12}

L'adesivo gentile in gel di silicone è facile da applicare e da rimuovere^{10,13,16,17} inoltre, ha dimostrato di minimizzare il dolore e i traumi durante i cambi di medicazione e l'ispezione della cute.^{10,11}



Indicatore di cambio con tecnologia EXUMASK[®]

Riduce al minimo l'impatto visivo dell'essudato assorbito.^{1,18} Funziona come indicatore di cambio della medicazione, aiutando a ridurre al minimo i cambi clinicamente non necessari.^{1,18}



Strato anti-perdite con tecnologia EXULOCK[®]

Assorbe l'essudato verticalmente e lo diffonde lateralmente, sfruttando l'intera area del tampone.^{1,13,19} Blocca al suo interno l'essudato, in modo da prevenire perdite^{1,13,19} e controllare gli odori.^{1,13,20}



Forma innovativa con bordi larghi

Innovativa forma a quadrilobo con bordi larghi, progettata per adattarsi in modo più sicuro alle diverse forme del corpo.^{2,13,18}

Indicazioni

- Gestione per seconda intenzione di ferite superficiali, granuleggianti, essudanti croniche e acute, a spessore parziale e totale, comprese: ulcere da pressione, ulcere degli arti inferiori, ulcere del piede diabetico, lesioni chirurgiche, ustioni di primo e secondo grado, siti donatori, lacerazioni cutanee, ulcere oncologiche patologicamente iperproliferanti.
- La medicazione può essere usata insieme a INTRASITE[®] GEL su ferite necrotiche o con slough.
- Prevenzione delle ulcere da pressione su cute integra nell'ambito di un protocollo di prevenzione delle ulcere da pressione.



INDICATORE: 0%

Non c'è bisogno di cambiare la medicazione.



INDICATORE: 50%

Non è ancora necessario cambiare la medicazione, ma valuta la possibilità di fissare un appuntamento.



INDICATORE: 75%

È ora di cambiare la medicazione, l'indicatore di cambio è quasi pieno.

Prevenzione delle lesioni da pressione

Se utilizzato come parte di un programma di prevenzione completo e confrontato con le sole cure standard, ALLEVYN LIFE ha dimostrato di:

- ridurre l'incidenza delle lesioni da pressione sacrali fino al 71% nei pazienti anziani con frattura dell'anca^{*21}
- ottenere un risparmio sui costi del trattamento per paziente tra il 37% e il 69%⁴
- ridurre la frequenza dei cambi di medicazione quando viene utilizzata su ulcere da pressione.^{†1,2}

Prevenzione delle lesioni da decubito correlate ai dispositivi medici

L'esclusivo design multistrato ha dimostrato di ridurre^{‡22} e ridistribuire la pressione^{§22}, il che lo rende adatto per proteggere prominenze ossee e la cute sotto dispositivi medici più grandi come collari cervicali e stecche per braccia e gambe.

*p=0,001; se utilizzato come parte di un programma di prevenzione completo e se confrontato con lo standard di cura. †Rispetto alle medicazioni precedenti. ‡Nell'ambito di un protocollo completo di prevenzione delle lesioni da pressione. §Rispetto a Mepilex Border[™] e Optifoam[™] Gentle.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, comprese le indicazioni per l'uso, controindicazioni, precauzioni e avvertenze, si prega di consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) applicabili al prodotto prima dell'uso.

Codice S+N	Misura	Unità
ALLEVYN LIFE		
66801067	10,3cm x 10,3cm	10
66801068	12,9cm x 12,9cm	10
66801069	15,4cm x 15,4cm	10
66801070	21cm x 21cm	10

Advanced Wound Management

Smith & Nephew S.r.l.
Viale T. Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)

T. +39 039 60941
F. +39 039 651535

www.smith-nephew.com/italia
www.smith-nephew.com/education

©Marchio di Smith+Nephew
Tutti marchi registrati e riconosciuti
©May2023 Smith+Nephew
Riservato al personale sanitario
AWM-AWC-41028-it. GMC1696a

Referenze: 1. Tiscar-González V, Menor-Rodríguez MJ, Rabadán-Sainz C, et al. Clinical and Economic Impact of Wound Care Using a Polyurethane Foam Multilayer Dressing. *Adv Skin Wound Care*. 2021;34(1):23-30. 2. Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. *J Wound Care*. 2015;24(7):312-317. 3. Allen D, Saunders C, Tiskowitz K. Reduced weekly dressing changes with a five-layer foam dressing. Results of a systematic literature review and meta-analysis of clinical studies. Paper presented at: SAWC; 2022; Las Vegas. 4. Forni C, Searle R. A multilayer polyurethane foam dressing for pressure ulcer prevention in older hip fracture patients: an economic evaluation. *J Wound Care*. 2020;29(2):120-127. 5. McFee K. Implementation of medical-device related pressure injury prevention protocols: Prophylactic foam dressing prone packets for Covid-19 patients in the ICU. Paper presented at: NPIAP; 2022; Florida. 6. Forni C, Gazineo D, Allegrini E, et al. Effectiveness of a multi-layer silicone-adhesive polyurethane foam dressing as prevention for sacral pressure ulcers in at-risk in-patients: Randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*. 2022;127:104172. 7. S+N 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. 8. S+N 2009. ALLEVYN Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/09/013/R7. 9. S+N 2007. Allevyn Ag Non-Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DOF 0702001. 10. Leonard S, McCluskey P, Long S, et al. An evaluation of ALLEVYN ADHESIVE and NON-ADHESIVE Foam Dressings. *Wounds UK*. 2009;5(1):17-28. 11. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN[®] Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32-44. 12. S+N 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSD.AWM.22.050. 13. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91-95. 14. White R, Hartwell S, Brown S. Interim report on a study to assess the effectiveness and improved fluid uptake of new ALLEVYN. *Wounds UK*. 2007;3(4):122-127. 15. S+N 2023. Bacterial barrier properties of the ALLEVYN Dressing Range. Internal Report. CSD.AWM.23.032. 16. S+N 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. 17. S+N 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life Wound Model (HVT080) GMCA-DOF/08. 18. Simon D, Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK*. 2014;10(3):80-87. 19. S+N Data on File. Wound Model Testing of New ALLEVYN Life Gen2 wcl Dressing using Horse Serum at a Flow Rate Modelling that of a Moderately Exuding Wound. DS/14/303/R. 2016. 20. S+N Data on File. Odour reducing properties of ALLEVYN LIFE. Internal Report. DS/12/127/DOF. 2012. 21. Forni C, D'Alessandro F, Gallerani P, et al. Effectiveness of using a new polyurethane foam multi-layer dressing in the sacral area to prevent the onset of pressure ulcer in the elderly with hip fractures: A pragmatic randomised controlled trial. *Int Wound J*. 2018;15(3):383-390. 22. S+N 2021. Pressure Mapping. Benchtop Testing Report. CSD.AWM.21.006.