


Die Antwort auf all Ihre **WUNDEN PUNKTE**

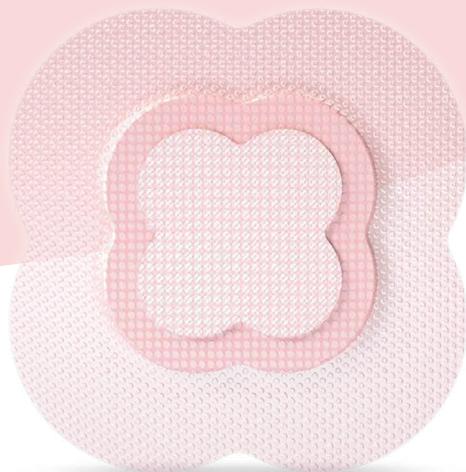

Sobald sich Bakterien im Verband befinden, werden über 99 % im Verband und von der Wunde ferngehalten.

Smith+Nephew

ALLEVYN[◇] LIFE
Silikon-Schaumverbände

Ihr wunder Punkt, wundervoll versorgt!

ALLEVYN[◇] LIFE Silikon-Schaumverbände



Atmungsaktive, bakteriendichte Folie²⁻⁴



Duschest⁵



Integrierte **Maskierungsschicht**
reduziert Sichtbarkeit der
Wundflüssigkeit⁶




Verschlusskern schließt auch
unter Druck sicher ein^{3,7}

Hydrozellulärer
Polyurethanschaum



Vollflächige Silikon-Wundkontakt-
schicht mit XL-Haftrand für eine
sanfte, zuverlässige Haftung und einen
schmerzarmen Verbandwechsel^{5,8}

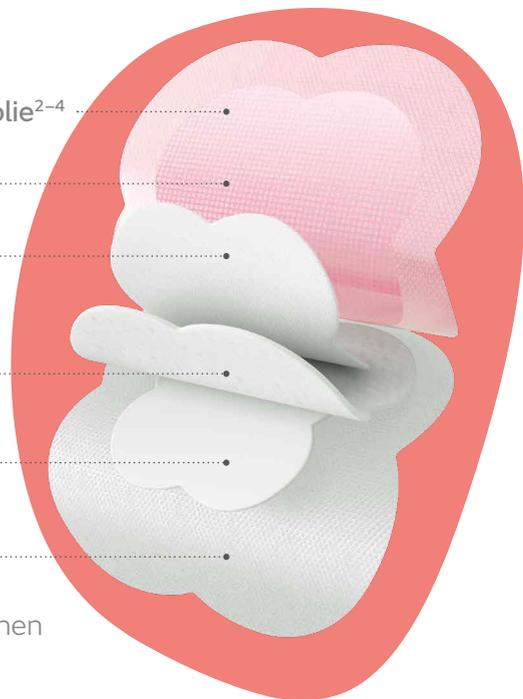

EXUMASK[◇] Technologie:
Für mehr Klarheit und
ein gutes Gefühl im Leben.

Klarheit dank **Verbandwechselindikator:**
Er zeigt an, wann gewechselt werden sollte.

Die **Maskierungsschicht** schenkt Sicherheit:
Sie reduziert die Sichtbarkeit des Exsudats
nach Außen und sorgt für ein sauberes und
diskretes Gefühl im aktiven Leben.




EXULOCK[◇] Technologie:
Schließt ein, was man
für sich behalten möchte.


Der **Superabsorber-Verschlusskern** schließt
Exsudat sicher ein und vermeidet unangeneh-
men Wundgeruch. Bei steigendem Exsudat-
level sorgt die zusätzliche Kapazitätsreserve
für Entspannung.

So einfach, so genial: >99% Bakterieneinschluss^{*,1}


Absorption von Wundexsudat und Bakterien sowie Schutz vor äußerlichem Eindringen von Bakterien^{1,9-12}

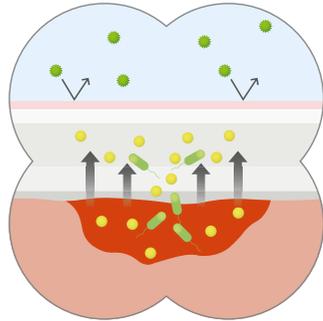

EXULOCK[◇] Technologie schließt Exsudat zuverlässig ein^{9-11,13} und der Verband hält über 99% der Bakterien im Verschlusskern fest* – auch unter Druck^{1,12}

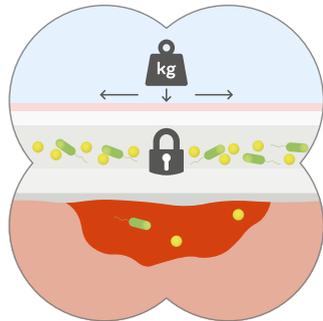

Mit dem Verbandwechsel werden die eingeschlossenen Bakterien entfernt¹

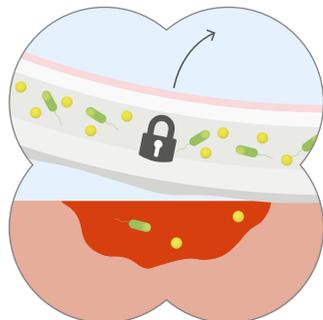



Ist Ihr wunder Punkt die Produktschwemme?

ALLEVYN[◇] LIFE –
einer für alle Fälle.

Der Silikon-Schaumverband, der für nahezu alle Wundsituationen geeignet ist.

ALLEVYN[◇] LIFE

- ist dank der einzigartigen Kleeblattform für **verschiedenste Körperkonturen geeignet**
- passt sich **variabel an das Exsudatlevel** an, absorbiert selbst zähflüssiges Exsudat **zuverlässig** und schließt auch unter Kompression sicher ein
- **sanfte Silikonbeschichtung** verträgt sich mit empfindlicher Haut bestens



Ist Ihr wunder Punkt der **Verbandwechsel?**

Mit ALLEVYN[◊] LIFE haben Sie es noch voll drauf.



Der Silikon-Schaumverband, der Ihnen Planungssicherheit gibt.

ALLEVYN[◊] LIFE

- reduziert Verbandwechsel und kann fast **bis zu 2x länger** als bisher verwendete Verbände* getragen werden.
- **schmerzarter Verbandwechsel** dank sanfter Silikonbeschichtung
- **EXUMASK[◊] Verbandwechselindikator** zeigt an, wann es so weit ist
- **EXULOCK[◊] Superabsorberverschlusskern** bietet im Falle eines steigenden Exsudatlevels zusätzliche Kapazitätsreserven



INDIKATOR
BEI 0%

OK ✓



INDIKATOR
50% GEFÜLLT

OK ✓



INDIKATOR
75% GEFÜLLT

Jetzt wechseln ⚠

* Verglichen mit der bisherigen klinischen Praxis.



Ist Ihr wunder Punkt die Therapieuntreue?

Ihre Patienten hängen an ALLEVYN[◊] LIFE.

Der Silikon-Schaumverband, der sich an den Körper und die Lebenssituation Ihrer Patienten anpasst.

ALLEVYN[◊] LIFE

- Silikonbeschichtung und XL-Haftrand für **zuverlässigen Halt und schmerzarmen Verbandwechsel**
 - reduziert Verbandwechsel und kann fast **bis zu 2× länger** als bisher verwendete Verbände* getragen werden
 - **EXULOCK[◊] Superabsorberverschlusskern** schließt Exsudat sicher ein und **vermeidet Wundgeruch** zuverlässig
 - **EXUMASK[◊] Technologie** vermeidet dank **Verbandwechselindikator** nicht nur unnötige, frühzeitige Wechsel, sie schenkt auch Sicherheit, weil das Durchscheinen von unansehnlichem Exsudat reduziert wird
 - ist **durchfest**
- ✚ Mit ALLEVYN[◊] LIFE **verbesserte sich die Zufriedenheit** der Patienten um 47% und 90,2% würden ihren Wundversorger **weiterempfehlen**.¹⁰

Ist Ihr wunder Punkt die Budgetknappheit?

Sparen Sie mit ALLEVYN[◇] LIFE am richtigen Ende.



Der Silikon-Schaumverband,
der Ihnen viel erspart.

ALLEVYN[◇] LIFE

- reduziert Verbandwechsel und kann fast **bis zu 2× länger** als bisher verwendete Verbände* getragen werden
- vermeidet unnötige Verbandwechsel dank **EXUMASK[◇] Verbandwechsel-indikator** und zuverlässigem **Exsudatmanagement mit EXULOCK[◇]**
- Eine **ungestörte Wundruhe** kann den Heilungsprozess fördern. ALLEVYN[◇] LIFE unterstützt mit EXULOCK[◇] und EXUMASK[◇] diese längere**, ungestörte Wundruhe und schafft ein **feuchtes, heilungsförderndes Wundmilieu**
- schont Ihre Ressourcen und spart Zeit im Hinblick auf Wechselhäufigkeit, Produktleistung und Akzeptanz der Patienten – somit sparen Sie bares Geld¹⁴

* Verglichen mit der bisherigen klinischen Praxis.

** Verglichen mit bisher verwendeten Verbänden.



Ist Ihr wunder Punkt der **Zeitdruck?**

ALLEVYN[◇] LIFE spart
Ihnen Zeit und Nerven.

Der Silikon-Schaumverband,
der mitdenkt und stressfrei anzuwenden ist.

ALLEVYN[◇] LIFE

- reduziert Verbandwechsel und kann fast **bis zu 2× länger** als bisher verwendete Verbände* getragen werden
- **extra breiter Silikon-Haftrand** für zuverlässigen Halt
- kann **repositioniert** werden und bedarf **keiner Sekundärfixierung**
- **EXUMASK[◇] Verbandwechselindikator** zeigt an, wann gewechselt werden sollte
- **5-lagiger Produktaufbau mit EXULOCK[◇]** schließt Exsudat zuverlässig ein^{9-11,13} und der Verband hält über 99% der Bakterien im Verschlusskern fest** – auch unter Druck^{1,12}

➕ ALLEVYN[◇] LIFE wird von **97% der Nutzer** von der Leistung her **besser bewertet** als andere Verbände und ist **leichter anzuwenden**.¹⁵

* Verglichen mit der bisherigen klinischen Praxis.

** Getestet in vitro.

Verordnen Sie inklusive Smith+Nephew PZN*!

Sind Sie auch genervt vom langen Suchen nach dem richtigen Produkt in Ihrer Arztsoftware? Erhalten Sie auch öfter Nachfragen aus der Apotheke, wenn Produkte nicht verfügbar oder nicht eindeutig verordnet sind?

Dann verordnen Sie direkt mit der Smith+Nephew PZN!


So kommen Sie schneller ans Ziel – und vermeiden unnötige und zeitraubende Rückfragen.

Auf der Rückseite dieser Broschüre finden Sie die eindeutigen PZNs der Smith & Nephew GmbH.

Darüber hinaus unterstützen wir Sie durch eine professionelle Beratung und spannende Produktschulungen.

Und mit einem persönlichen Ansprechpartner, der immer für Sie da ist:

Ihr Ansprechpartner

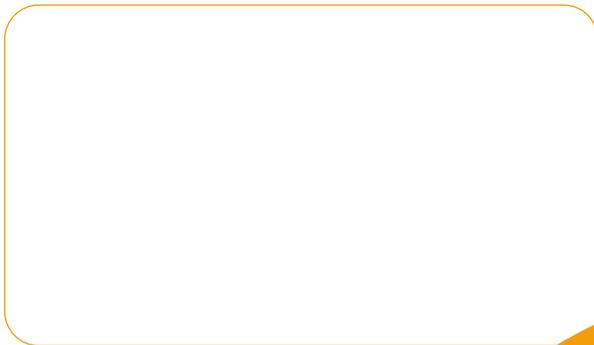

Für die gängigsten Arztsoftwares gibt es auch einfache **Schritt-für-Schritt-Anleitungen**, wie man die PZNs in der Software finden kann.

Sprechen Sie uns gern an!

* Pharmazentralnummer.

Sie haben noch Fragen? Wir haben noch Antworten!

Unsere Online-Services für Sie:



Applikationsvideos



Überblick über die Indikationen



Anwendungsleitfäden



Videos zur Wirkweise von ALLEVYN° LIFE



Ein Blick ins Labor



Produktportfolio und PZNs



Jetzt QR-Code scannen und
unsere Services entdecken!

Wo kommt ALLEVYN[◇] LIFE zum Einsatz?

1 Wundbehandlung mit sekundärer Wundheilung bei flachen, granulierenden Wunden, chronischen und akuten exsudierenden Wunden, Voll- und Spalthautwunden, wie z. B.

- Druckgeschwüre
- Beingeschwüre
- Diabetische Fußgeschwüre
- Verbrennungen ersten und zweiten Grades
- Operationswunden
- Hautentnahmestellen
- Hautrisse
- Exulzierende Geschwüre

2 Vorbeugung von Druckgeschwüren auf intakter Haut im Rahmen eines Druckgeschwürprophylaxe-Protokolls¹⁶

Blieben Sie auf dem Laufenden!

Melden Sie sich für Marketing-Updates an, um Informationen über S+N und Themen rund um Ihre Interessengebiete zu erhalten. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit aktualisieren.



- + Webinare
- + Neuheiten
- + Muster

ALLEVYN[◊] LIFE direkt über unsere PZNs* verordnen!

PZN	Größe Verband	Größe Wundauflage	Inhalt/OP**
 ALLEVYN[◊] LIFE			
09634019	10,3 × 10,3 cm	5,1 × 5,1 cm	10 Stück
09634031	12,9 × 12,9 cm	7,6 × 7,6 cm	10 Stück
09634048	15,4 × 15,4 cm	10,2 × 10,2 cm	10 Stück
09634060	21,0 × 21,0 cm	15,4 × 15,4 cm	10 Stück
 ALLEVYN[◊] LIFE SACRUM			
02495000	17,2 × 17,5 cm	12,4 × 8,5 cm	10 Stück
02495129	21,6 × 23,0 cm	17,0 × 12,3 cm	10 Stück
 ALLEVYN[◊] LIFE HEEL			
07116438	25,0 × 25,2 cm	20,0 × 20,2 cm	5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)

* Pharmazentralnummer.

** Originalpackung.

Kontakt:

Smith & Nephew GmbH

Friesenweg 30
22763 Hamburg

T +49(0) 40 8787 44-0

T +49(0) 40 8787 44-375

www.smith-nephew.de | www.wundervoll-versorgt.de

info@smith-nephew.com

Smith+Nephew

© 2024 Smith & Nephew GmbH; ◊ Warenzeichen von Smith & Nephew GmbH; P200326; AWM-AWC-40915 v2.

Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Hersteller: Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessle Rd, Hull HU3 2BN, England

Referenzen: **1.** Smith+Nephew 2023. Investigation of the bacterial retention capacity of ALLEVYN[◊] LIFE, DURAMAX[◊] S and DURAFIBER[◊] dressings over a 1-hour test period against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa. CSD. AWM.23.019 **2.** Data on File Report TW141-198 – Bacterial Barrier Wet/Wet test **3.** Data on File Report DS/15/025/R – May 2016, L. Daubney. Physical Testing ALLEVYN[◊] LIFE Gen2 **4.** R&D Report RD/16/019 – June 2016, N. Fry. Permeability of Hydrophilic Polyurethane Film when in contact with water & water vapour **5.** Data on File Report GMCA-DOF/08 – April 2016, A. Rossington. Product Performance of Next Generation ALLEVYN[◊] LIFE **6.** Data on File Report DS/16/061R – February 2016, E. Mumby. Subjective comparison of masking ability of ALLEVYN[◊] LIFE Gen2 **7.** Data on File Report DS/14/303R – April 2016, K. Earl. Wound Model Testing of ALLEVYN[◊] LIFE Gen2 using Horse Serum **8.** Joy H et al. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. J Wound Care. 2015;24(7):314-317 **9.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN[◊] LIFE. Wounds UK. 2013;9(4):91 - 95 **10.** Tiscar-González V, Menor-Rodríguez MJ, Rabadán-Sainz C, et al. Clinical and Economic Impact of Wound Care Using a Polyurethane Foam Multilayer Dressing. Adv Skin Wound Care. 2021;34(1):23-30 **11.** Smith+Nephew 2016. Wound Model Testing of New ALLEVYN[◊] LIFE Gen2 wcl Dressing using Horse Serum at a Flow Rate Modelling that of a Moderately Exuding Wound. DS/14/303/R **12.** Smith+Nephew 2021. Total Absorbency and Retention after Compression - ALLEVYN[◊] LIFE Foam Dressing vs Mepilex[™] Border Comfort/Flex, Urgostart[™] Border, Aquacel[™] Foam and Klinidern[™]. Benchtop Testing Report. CSD.AWM.21.001 **13.** Simon D, Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. Wounds UK. 2014;10(3):80 - 87 **14.** Mit ALLEVYN[◊] LIFE konnten die wöchentlichen Kosten pro Patient für Verbände um 58,7% gesenkt werden.¹⁰ **15.** Kronert G, Roth H, Searle R. The impact of introducing a new foam dressing in community practice. EWMA Journal 2016 **16.** Bitte beachten: Bisher werden Schaumverbände im nie-dergelassenen Bereich zur Dekubitusprophylaxe nicht erstattet.