

+ Medicazione in schiuma ALLEVYN[◇] COMPLETE CARE

Aiuta a ridurre al minimo le perdite*¹⁻³ e a prevenire i fattori che contribuiscono allo sviluppo delle lesioni da pressione^{†4-7}



Smith+Nephew

ALLEVYN[◇]
COMPLETE CARE
Medicazione in schiuma

www.smith-nephew.com/it-it/

Indicazioni

- Gestione della ferita per seconda intenzione in caso di ferite superficiali, con granulazione, croniche e acute con essudato, nonché ferite a spessore totale e parziale, incluse:
 - Ulcere da decubito
 - Ulcere degli arti inferiori
 - Ulcere del piede diabetico
 - Ferite chirurgiche
 - Ustioni a spessore parziale e superficiali
 - Siti di prelievo per innesto cutaneo
 - Skin tears
 - Ulcere cutanee iperproliferanti
- Prevenzione delle lesioni correlate alla compressione tessutale nell'ambito del protocollo dedicato

Uso combinato

- Utilizzabile in combinazione con INTRASITE[◇] GEL in caso di ferite necrotiche o con slough
- Utilizzabile in combinazione con il sistema di bendaggio compressivo multistrato PROFORE[◇]



**ASSORBENZA
DA BASSA A
ELEVATA**

Grazie alla loro struttura esclusiva, le medicazioni in schiuma **ALLEVYN[®]** **COMPLETE CARE** aiutano a **ridurre al minimo le perdite**^{*1-3} e a **prevenire i fattori che contribuiscono allo sviluppo delle lesioni da pressione**⁺⁴⁻⁷

Caratteristiche e vantaggi

Gestione dell'essudato




Tecnologia avanzata anti-perdite ExuLOCK[®]

- Blocca l'essudato e i batteri anche sotto compressione^{1,8}
- Utilizza l'assorbimento laterale su tutta l'area della medicazione^{*9} per contribuire a prevenire le perdite^{2,3}
- Crea un ambiente umido per la ferita[†] ottimale per la guarigione e la gestione del volume di liquido nella medicazione^{3,5,9,10}


Tecnologia dell'indicatore di cambio ExuMASK[®]

- Maschera visivamente l'essudato assorbito, mantenendo la medicazione più pulita più a lungo^{2,3,9,11-14}
- Indica visivamente quando sostituire la medicazione¹¹


Guida visiva all'indicatore di cambio ExuMASK

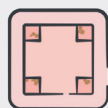

Sostituzione non necessaria

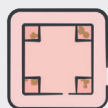

Considerare il cambio

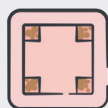

Sostituire



Tecnologia adesiva in silicone morbido ComfortSTAY[®]

- Garantisce un equilibrio ottimale tra adesione e delicatezza¹⁵⁻¹⁷
- È atraumatica per la ferita e la cute circostante, per ridurre al minimo il dolore durante la rimozione^{3,16-18}



Schiuma altamente assorbente ALLEVYN

- Assorbimento verticale prolungato per ridurre al minimo il ristagno e la macerazione^{1,3,9}
- La dimensione dei pori della schiuma gestisce l'essudato, dalle viscosità più basse a quelle più elevate⁹



Pellicola superiore altamente traspirante

- Prestazioni prolungate della barriera antibatterica^{†19}
- Resistente all'acqua²⁰

Tecnologia elastica multidirezionale HighFLEX



- Altamente conformabile e flessibile^{7,21}
- Aderisce saldamente ai contorni del corpo^{§3,22}
- Facilita l'applicazione su aree difficili^{§3,12,22}

Prevenzione delle lesioni da pressione



Tecnologia ShearDEFENSE[®] a strati indipendenti

- Il design brevettato a strati indipendenti consente agli strati di scorrere creando attrito all'interno della medicazione^{*4}
- Assorbe le forze di taglio e limita lo stiramento dei tessuti molli^{†4,23} riducendo al minimo il rischio di lesioni da pressione²⁴
- Assorbimento altamente efficace del taglio e dell'attrito^{†4}



Tecnologia adesiva in silicone morbido ComfortSTAY

- Può essere riposizionata mantenendo l'adesione per facilitare le ispezioni cutanee nel tempo di utilizzo della medicazione^{*15}



Pellicola superiore altamente traspirante

- Aiuta a creare un microclima ottimale^{5,10}



Ridistribuzione della pressione

- Distribuisce la pressione generata da impatti esterni^{†6}

Gamma di medicazioni ALLEVYN COMPLETE CARE

Codice S+N	Misura	Scatola
66807695	7,5 cm x 7,5 cm	10
66807696	10 cm x 10 cm	10
66807697	12,5 cm x 12,5 cm	10
66807698	15 cm x 15 cm	10
66807699	17,5 cm x 17,5 cm	10
66807700	10 cm x 20 cm	10
66807701	10 cm x 30 cm	10
66807702	Multisite 17,1 cm x 17,9 cm	10
66807703	Small Sacrum 17,2 cm x 17,5 cm	10
66807704	Large Sacrum 21,6 cm x 23 cm	10
66807705	Heel 25 cm x 25 cm	10



*Come dimostrato in vitro. †Come dimostrato in silico e in vitro. ‡Nel tempo di utilizzo della medicazione. §Medicazioni ALLEVYN a 5 strati. ¶Come dimostrato in silico.

Advanced Wound Management
Smith & Nephew S.r.l.
Viale T. Edison 110, Edificio A
20099 Sesto San Giovanni (MI)

www.smith-nephew.com/it-it/

T: +39 039 60941
+44 (0) 1482 225181
F: +39 039 651535
+44 (0) 1482 328326

◇Marchio di Smith+Nephew.
Riservato al personale sanitario.
Tutti i marchi attribuiti ai
rispettivi titolari
©Agosto 2025 Smith+Nephew
AWM-AWC-47986-IT_GMC1944

Dal momento che la disponibilità è soggetta alle pratiche mediche e/o normative dei singoli Paesi, i prodotti potrebbero non essere reperibili in tutti i mercati. Contattare il rappresentante o il distributore Smith+Nephew in caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Smith+Nephew nella propria zona. Per informazioni dettagliate sul prodotto, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso del prodotto prima dell'impiego.

Bibliografia: 1. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.008. 2. Tiscar-González V, et al. *Adv Skin Wound Care*. 2021;34(1):23–30. 3. Rossington A, et al. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95. 4. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.057 V2. 5. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.011. 6. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.016. 7. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.012. 8. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.019 V2. 9. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.009 V2. 10. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.010. 11. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.023 V2. 12. Simon D, Bielby A. *Wounds UK*. 2014;10(3):80–87. 13. Joy H, et al. *J Wound Care*. 2015;24(7):312, 314–317. 14. Costa B, Allen D. Poster presented at: EWMA; 2023. 15. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.015 V2. 16. Vowden K, et al. Paper presented at: EWMA; 2011. 17. Smith+Nephew. Internal report EA/AWM/GENERAL/001/v2. 18. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN[®] Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44. 19. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.014. 20. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.017. 21. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.013. 22. Stephen-Haynes J, et al. *Journal of Community Nursing*. 2013;27(5):50–59. 23. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.058 V2. 24. Atkinson L, Costa B. Poster presented at: EWMA; 2024.