


+ Renasys[◇] EDGE, progettato all'insegna della **semplicità**

Semplice da configurare, facile da utilizzare¹

- La pompa è dotata di un'interfaccia intuitiva e facile da usare, con guida in linea per la risoluzione dei problemi.¹
- Progettato per rivoluzionare la formazione dei clinici.¹

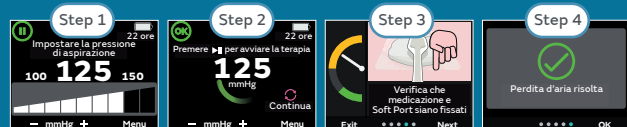

+ Efficiente in ogni fase



La funzione di autotest elimina la necessità di manutenzione annuale

- Robusto, affidabile e durevole per ridurre il numero di sostituzioni del dispositivo.²
- Il processo di auto pulizia richiede meno di **5 minuti**.³

Leggero e portatile⁴

- Compatto e maneggevole: progettato per consentire ai pazienti di continuare la loro vita quotidiana.⁴
- Il Canister integrato da 300 ml è pensato per garantire discrezione, permettendo al tempo stesso una valutazione dell'essudato.



I clinici descrivono il **Sistema RENASYS[◇] EDGE** come "Efficace, affidabile e facile da usare".⁵

CODICI RENASYS

CANISTER RENASYS[◇] EDGE

	300ml con solidificante	66803139
	800ml con solidificante	66803140

RENASYS[◇] ACCESSORI

	Film Large (20x30cm)	66800394
	Film Extra Large (40x60cm)	66800853
	RENASYS [◇] Softport	66800799
	CONNETTORE A Y	66800971

RENASYS[◇] F

	Small (10x8x3cm + 1 film)	66800794
	Medium (20x12,5x3cm + 2 film)	66800795
	Large (25x15x3cm + 3 film)	66800796
	Extra large (48x41x1,5cm + 6 film)	66800797

RENASYS[◇] G

	Small (1 garza AMD 15x17cm + 1 film)	66800933
	Medium (2 garze AMD 15x17cm + 1 film)	66800934
	Large (Rotolo garza AMD 11,4cm x 3,7m + 2 film)	66800935
	Extra large (2 rotoli garza AMD 11,4cm x 3,7m + 3 film)	66800936

RENASYS[◇] AB

	Kit di medicazione addominale (2 blocchi di schiuma 43x30x2,5 cm + strato di protezione organi + 6 film)	66800980
---	--	----------



Consulta qui i riferimenti bibliografici

Contatti di riferimento:




Advanced Wound Management
Smith & Nephew S.r.l.
Viale T. Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
T. 39 039 60941
T. 39 039 651535

www.smith-nephew.com/it-it/
AWM-AWD-50827-IT
◇ Marchio di Smith&Nephew.
Tutti marchi registrati e riconosciuti.
Riservato al personale sanitario.
© Giugno 2026

Semplificare la terapia a pressione negativa?

È possibile

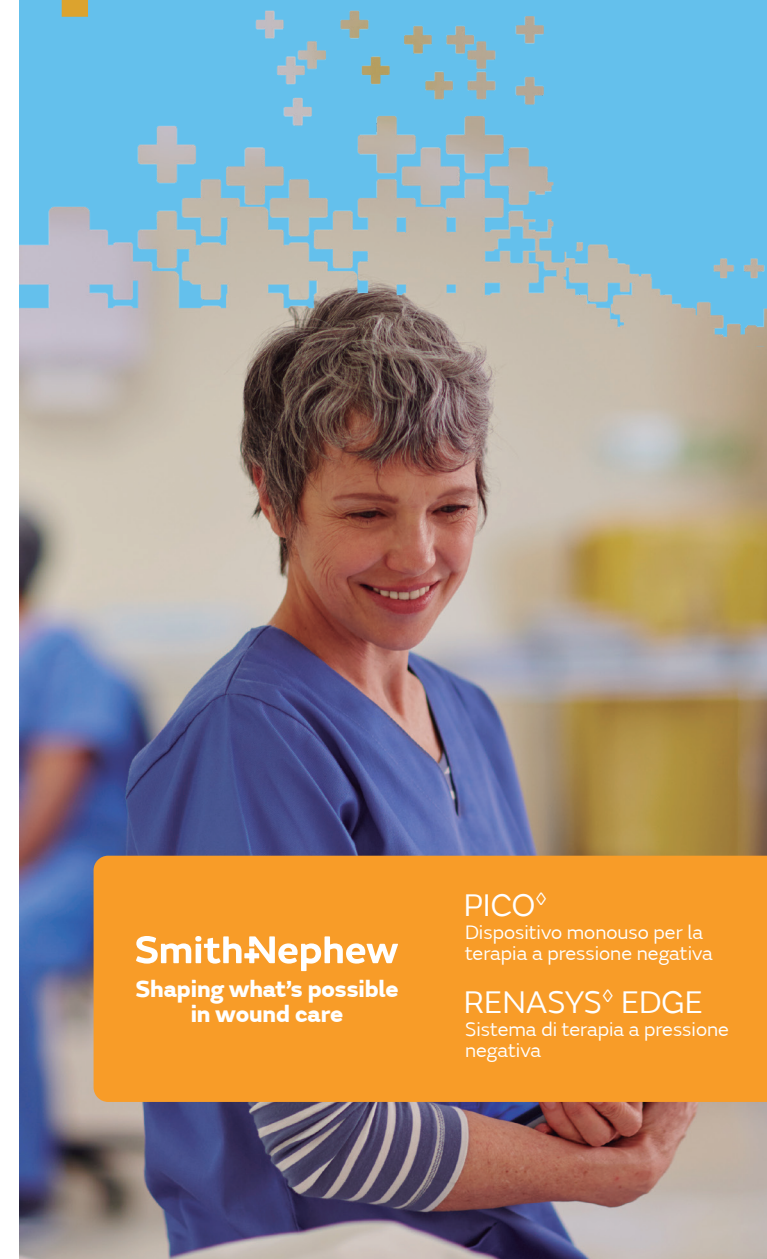

Smith+Nephew
Shaping what's possible
in wound care

PICO[◇]
Dispositivo monouso per la
terapia a pressione negativa

RENASYS[◇] EDGE
Sistema di terapia a pressione
negativa

Il paziente presenta:

Che dimensione ha la ferita?

Piccola

Media

Grande

Basso

Moderato

Qual è il livello di essudato?

Moderato

Alto

Terapia raccomandata

Il percorso indica che è raccomandata una terapia a pressione negativa monouso (sNPWT)

Il percorso indica che è raccomandata una terapia a pressione negativa tradizionale (tNPWT)

RENASYS

Sistema di terapia a pressione negativa



PICO

Dispositivo monouso per la terapia a pressione negativa

Scegliti la medicazione

Scegli una medicazione sNPWT più grande della ferita grande per distribuire la pressione negativa su tutta la medicazione e trattare anche l'area circostante.^{27*}

Per le ferite con essudato moderato, se la ferita non può essere adeguatamente contenuta sotto una medicazione sNPWT, è opportuno prendere in considerazione la tNPWT. Per le ferite con essudato alto, la tNPWT è indicata. Selezionare una medicazione tNPWT in grado di coprire completamente la ferita. Le ferite più profonde richiedono l'impiego di un filler.

Scegliti il tipo di filler

Ferite con profondità inferiore a 0,5 cm

Le ferite con profondità compresa tra 0,5 e 2 cm possono richiedere un filler. Le ferite con profondità superiore a 2 cm devono essere trattate con un filler.

Non è richiesto alcun filler

Filler in schiuma o Garza

La NPWT (terapia a pressione negativa) richiede un contatto diretto con il letto della ferita, e le ferite più profonde, con tunnelizzazioni o sottominazioni, richiedono un riempimento con schiuma o garza per NPWT, oppure una combinazione di entrambi.

Profondità superficiale, forma irregolare

Filler in schiuma o in garza o una combinazione

Profonda, a forma regolare

Filler in schiuma

Solo la terapia monouso a pressione negativa di PICO è dotata della tecnologia AIRLOCK^{Q12}



Ampia zona di azione. Pressione costante. Efficacia supportata da evidenze

Lo strato superiore ha un alto tasso di trasmissione del vapore acqueo e protegge le ferite dalla contaminazione esterna.¹⁴⁻¹⁵

Fino all' 80% dell'essudato evapora²¹

Circa il 20% dell'essudato rimane nella medicazione^{1,21}

Lo strato in silicone adesivo protegge l'ambiente della ferita e aiuta a ridurre al minimo il dolore durante il cambio della medicazione.

Il sistema PICO con tecnologia AIRLOCK^Q consente l'applicazione della pressione negativa su tutta la medicazione, distribuendo il trattamento su un'area più ampia che va oltre la sola ferita.¹⁶⁻¹⁸

*Test In-vitro.

Medicazione	Dimensioni della medicazione	PICO ^Q 7 +1 medicazione	+2 medicazioni	PICO ^Q 14 +2 medicazioni
	10cm x 20cm fino a 82 ml* / medicazione	66802012	66802002	66802042
	10cm x 30cm fino a 137 ml* / medicazione	66802013	66802003	66802043
	10cm x 40cm fino a 192 ml* / medicazione	66802014	66802004	66802044
	15cm x 15cm fino a 110 ml* / medicazione	66802015	66802005	66802045
	15cm x 20cm fino a 165 ml* / medicazione	66802016	66802006	66802046
	15cm x 30cm fino a 275 ml* / medicazione	66802017	66802007	66802047
	20cm x 20cm fino a 247 ml* / medicazione	66802018	66802008	66802048
	25cm x 25cm fino a 440 ml* / medicazione	66802019	66802009	66802049
	Multisite Small 15cm x 20cm fino a 135 ml* / medicazione	66802010	66802000	66802040
	Multisite Large 20cm x 25cm fino a 272 ml* / medicazione	66802011	66802001	66802041

* Derivato da test di laboratorio (bench testing) su un sistema PICO sNPWT lasciato in sede fino a 4 giorni su una ferita con essudato moderato (1,1 g/cm²/24 ore). Questi calcoli forniscono un'indicazione della quantità di fluido che si prevede venga gestita; i valori effettivi durante l'uso possono variare in base a condizioni ambientali, come l'occlusione della medicazione o il posizionamento non corretto del port.

Accessori

	Filler in schiuma di poliuretano 10 cm x 12,5 cm	66801021
	Kit medicazione filler in garza composto da: salvietta SECURA (cod. 66800712) e garza antimicrobica KERLIX AMD 11,4 cm x 3,7 m (cod. 3332)	66802127
	Adhesive gel patch 10 cm x 7 cm	66801082
	ACTICOAT Flex 10 cm x 20 cm	66800409
	ACTICOAT Flex 10 cm x 10 cm	66800399

Una solida base di evidenze cliniche

Ad oggi, sono state identificate **316*** pubblicazioni cliniche (evidenze peer-reviewed e abstract) riguardanti PICO sNPWT (166 studi unici).

LIVELLI DI EVIDENZA



60

RCT, meta-analisi, valutazioni di economia sanitaria degli RCT



19

Studi comparati osservazionali prospettici



35

Studi osservazionali comparativi retrospettivi



62

Serie di casi clinici




90

Pareri di esperti, casi di studio o ricerche di laboratorio

(+50 studi che includono PICO^Q sNPWT)



Aiuta i tuoi pazienti a tornare verso la guarigione con il dispositivo monouso PICO^Q, grazie a una terapia PRO-ATTIVA 360°

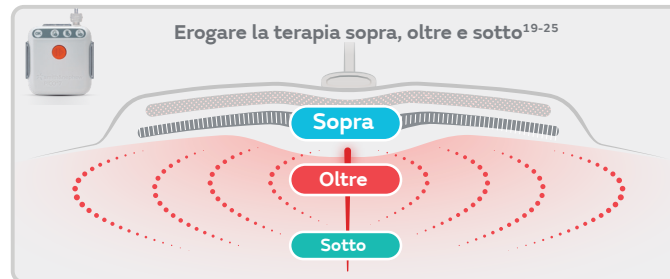

Sopra

Rimuove l'eccesso di fluidi²¹ e intrappola i batteri, proteggendo da possibili contaminazioni^{31,32}

Oltre

Stimola il sistema linfatico per ridurre l'edema, agevolando il deflusso dei fluidi in eccesso all'interno del sistema linfatico^{26,27}

Sotto

Promuove le variazioni nel flusso sanguigno per l'apporto di ossigeno e sostanze nutritive essenziali^{28,29}

Migliora il flusso sanguigno e di ossigeno per l'apporto di sostanze nutritive essenziali^{28,29}

Aiuta a creare un ambiente che supporta l'attività cellulare per una chiusura adeguata^{21,22,30}

Protegge con la biomeccanica

Attiva la biologia della gestione della ferita