

+ OPSITE[◇] POST-OP Visible

Permite la visualización de la herida, lo que puede reducir la necesidad de cambios de apósito innecesarios^{1,2}



Un apósito hipoalergénico para ayudar a minimizar el riesgo de flictenas postoperatorias.¹⁻³

Smith+Nephew

OPSITE[◇] POST-OP VISIBLE

Apósito impermeable transparente con barrera bacteriana y almohadilla absorbente

www.smith-nephew.com/opsite



El diseño innovador del apósito OPSITE[®] POST-OP VISIBLE combina la visibilidad con una película de barrera bacteriana⁵⁻⁷ y una almohadilla absorbente para ayudar a garantizar que la herida está protegida.⁴

Gestión efectiva de las heridas postoperatorias


Alta tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR)⁴
Su estructura molecular única proporciona un alto MVTR, lo que permite que transpire la humedad no deseada

Espuma hidrocélular de celosía absorbente
Controla el progreso de la incisión sin cambios innecesarios de apósitos. La espuma reticulada absorbente gestiona el exudado e indica el momento del cambio de apósito

Cómodo y adaptable
Apósito hipoalergénico con diseño único²⁶ garantiza que sea adaptable, cómodo de llevar, fácil de poner y retirar¹

Capa impermeable
El paciente puede bañarse con el apósito en su lugar^{2,9}

Barrera bacteriana
Proporciona una barrera contra las bacterias², incluido el SARM(in-vitro)^{7,8}, para ayudar a reducir la contaminación bacteriana secundaria⁸

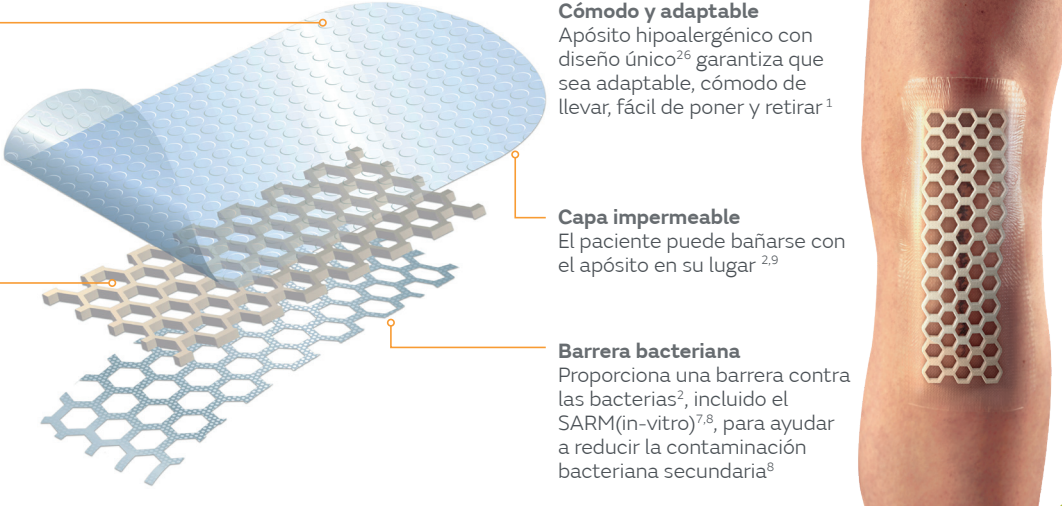

Características y ventajas



Diseñado específicamente para heridas postoperatorias



Resistente a la ducha^{2,9}



Bajo dolor al retirarlo^{1,8}

OPSITE POST-OP VISIBLE

S+N Código	Tamaño	Unidades
66800136	10cm x 8cm	20
66800137	15cm x 10cm	20
66800138	20cm x 10cm	20
66800139	25cm x 10cm	20
66800140	30cm x 10cm	20
66800141	35cm x 10cm	20

Indicaciones

- Para utilizar en heridas agudas tales como:
 - Heridas postoperatorias
 - Laceraciones
 - Cortes
 - Abrasiones
 - Quemaduras menores donde los niveles de exudados son de escaso a moderado

Referencias

1. O'Brien G, Buckley K, Vanwalleghe G, et al. A multi-centre, prospective, clinical inmarket evaluation to assess the performance of OPSITE POST-OP Visible dressings. *International Wound Journal*. 2010;7(5):329-337. 2. Arroyo AA, Casanova PL, Soriano JV, Torra I Bou J-E. Open-label clinical trial comparing the clinical and economic effectiveness of using a polyurethane film surgical dressing with gauze surgical dressings in the care of post-operative surgical wounds. *International Wound Journal*. 2015;12:285-292. 3. Internal report 2018. Low allergy adhesive claims support for OPSITE POST-OP Visible. PSS306. 4. Smith & Nephew 2018. OPSITE POST-OP Visible Dressing physical properties. Internal report. DS/18/368/R. 5. Smith & Nephew 2003. Bacterial barrier testing of IV3000[®]. Internal report. WRPTW042-281. 6. Internal report 2006. An In-vitro assessment of the Bacterial Barrier properties of ALLEVYN[®] ADHESIVE. 0607022. 7. Internal report 2005. Bacterial barrier properties of OPSITE POST-OP Film against Methicillin-Resistant *Staphylococcus Aureus* (MRSA). 0505004. 8. Searle R, Bielby A. Dressing strategies for the management of infected wounds in community wound care: impacts and implication. Wounds UK; 2010; Harrogate. 9. Byrne-Murphy S. A prospective evaluation of a new dressing OPSITE POST-OP Visible on post op blistering following total hip and knee replacement. Paper presented at: Wounds UK; 2009; Harrogate, UK. CSR/CT10/02.



Curación de heridas
Smith+Nephew, S.A.U.
Frutuós Gelabert, 2-4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 93 373 73 01

www.smith-nephew.es

AWM-AWC-22172-es v2 Opsite Post OP
Visible 0421
◊ Marca registrada de Smith+Nephew
© Mayo 2025

Smith+Nephew