


# FOOTPRINT Ultra

Der knotenlose Einschlag-Fadenanker für die laterale Reihe in der Double-Row- oder als Stand-alone-Anker bei Single-Row-Technik – erhältlich in 4,5 und 5,5 mm aus nicht resorbierbarem PEEK®. Die einzigartige Ankerkonstruktion ermöglicht die präzise manuelle Spannungsanpassung des Fadens auch nach dem Einbringen des Ankers und sorgt für hervorragende Ausreißkräfte. Das minimierte Faden-slippage reduziert das Displacement der Rotatorenmanschette.

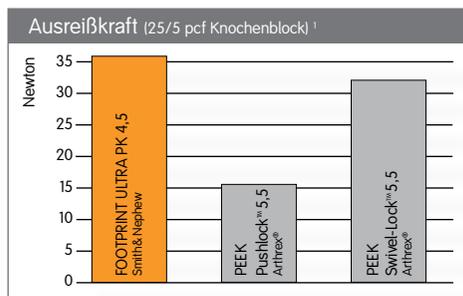

## Kontrolle der Fadenspannung bis zuletzt

Die Fadenfixation im FOOTPRINT Ultra Anker erfolgt durch einen integrierten Gewindepin – reproduzierbar und unabhängig von der vorliegenden Knochenqualität – und ermöglicht die Anpassung der Fadenspannung auch nach Einbringen des Ankers.

## Mehr Präzision für verringertes Faden-Slippage

Die neue Präzisionstechnik bei der Fadenfixierung ermöglicht eine geringere "gap formation" und deutlich weniger Displacement.

## Hervorragende Ausreißkräfte

Das einzigartige Ankerdesign mit Widerhaken verleiht dem FOOTPRINT Anker hervorragende Ausreißkräfte.