

+ ALLEVYN[®] GENTLE BORDER

Apósitos de espuma

Puedes confiar para adaptarse y mantenerse aplicado¹⁻⁵



Smith+Nephew

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER

Apósitos de espuma

www.smith-nephew.com/allevyn

Indicaciones

- Tratamiento de lesiones superficiales en granulación, heridas exudativas crónicas y agudas, heridas de espesor total y parcial, incluyendo:
 - Lesiones por presión
 - Úlceras de pierna
 - Úlceras de pie diabético
 - Heridas quirúrgicas
 - Quemaduras de primer y segundo grado
 - Zonas donantes
 - Desgarros cutáneos
 - Úlceras fúngicas
- Prevención de lesiones por presión en piel intacta como parte de un protocolo de prevención de lesiones por presión



**ABSORCIÓN
MODERADA**

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER los apósitos son adaptables y priorizan el bienestar de tus pacientes, con una variedad de formas y tamaños para adaptarse a varios tipos de heridas.⁵⁻⁸

Características y beneficios

Gama ALLEVYN: Absorbente, protector y suave

Los apósitos de espuma ALLEVYN son absorbentes, protectores y suaves, y cumplen con lo básico de lo que esperas de un apósito y más.



Absorbente^{7,9,10}

El núcleo de espuma hidrocélular **equilibra de manera innovadora la absorción y la retención** para crear un entorno húmedo de cicatrización de heridas^{5,11-14} con riesgo mínimo de maceración.^{5,11-13}



Protectora^{7,15}

La película superior transpirable e impermeable^{7,9,10} **proporciona una barrera bacteriana**¹⁶ mientras que el apósito permanece intacto.



Suave^{5,12}

Los adhesivos suaves de contacto con la herida son **fáciles de aplicar y retirar**^{11,13,17,18} y se ha demostrado que **minimizan el dolor y el traumatismo** durante los cambios de apósito y la inspección de la piel.^{9,10}

ALLEVYN GENTLE BORDER



Tecnología de flexibilidad multidireccional

- Ayuda con la aplicación en **áreas difíciles**⁵⁻⁸
- Facilita la adaptabilidad y ayuda a **maximizar la comodidad del paciente**.^{3,5-8}



Apósito único multilobular

El diseño exclusivo multilobular se adapta a zonas del cuerpo difíciles de cubrir, como la rodilla, **permitiendo una flexibilidad total de la articulación**.^{5-8,19}




Puede cortarse^{*20}

Fácil de cortar a medida sin deshilacharse, lo que agrega flexibilidad²⁰

Prevención de lesiones por presión[†]

ALLEVYN GENTLE BORDER[†] cuando se utilizó con los cuidados preventivos convencionales, redujo la incidencia de lesiones por presión de categoría I en la región sagrada en un 90% de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos (UCI), en comparación con el uso de cuidados convencionales solos.^{‡21}

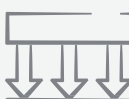

PLPP relacionados con dispositivos médicos

La posibilidad de cortarse²⁰ y la extensión multidireccional ayuda a adaptarse a áreas difíciles^{5,6,8} lo que hace que los apósitos sean versátiles y adaptables para su uso bajo dispositivos médicos como catéteres y otros tubos.

*El corte comprometerá las propiedades de barrera bacteriana del apósito. †Como parte de un protocolo de prevención de lesiones por presión. ‡n=66

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER



ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Foam Dressing



ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Sacrum Foam Dressing



ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Heel Foam Dressing



ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Multisite Foam Dressing

Código S+N	Tamaño	Un.
66800269	7.5cm x 7.5cm	10
66800270	10cm x 10cm	10
66800900	10cm x 20cm	10
66800264	10cm x 25cm	10
66800265	10cm x 30cm	10
66800272	12.5cm x 12.5cm	10
66800975	15cm x 15cm	10
66800273	17.5cm x 17.5cm	10
66800898	Sacrum 16.8cm x 17.1cm	10
66801031	Sacrum 21.6cm x 23cm	10
66800959	Multisite 17.1cm x 17.9cm	10
66800506	Heel 23cm x 23.2cm	5

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, las contraindicaciones, las precauciones y las advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) aplicables al producto antes de usarlo.

Referencias: 1. Callaghan R, Chadwick P, Mahoney K, Stephen-Haynes J. Wounds UK. 2012;8(4):110-118. 2. Daves A, Harish S, Price J. Selecting dressings to manage exudate and enhance patient wellbeing. Wounds UK. 2015;11(3):54-61. 3. Hampton S. British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing). 2010;19(6):S30-S33. 4. Stephen-Haynes J, Greenwood M, Merrick J, Callaghan R. British Journal of Community Nursing 2012;17S38-S44. 5. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK. 2009;5(3):32-44. 6. S+N 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report. DS/16/465/R. 7. S+N 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. 8. Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. Wounds UK 2016;12(2):70-78. 9. S+N 2009. ALLEVYN Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/09/013/R7. 10. S+N 2007. Allevyn Ag Non-Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DOF 0702001. 11. Leonard S, McCluskey P, Long S, Butters V, Winter R, Smith G. An evaluation of Allevyn™ Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. Wounds UK. 2009;5(1):17-26. 12. S+N 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSDAWM22050. 13. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK. 2013;9(4):91-95. 14. White R, Hartwell S, Brown S. Interim report on a study to assess the effectiveness and improved fluid uptake of new ALLEVYN. Wounds UK. 2007;3(4):122-127. 15. Forni C, Gaziano D, Allegrini E, et al. Effectiveness of a multi-layer silicone-adhesive polyurethane foam dressing as prevention for sacral pressure ulcers in at-risk inpatients: Randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies. 2022;127:104172. 16. S+N 2023. Bacterial barrier properties of the ALLEVYN Dressing Range. Internal Report. CSDAWM23032. 17. S+N 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. 18. S+N 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life Internal Report (HVT080) GMCA-DOF/08. 19. S+N 2017. Internal Report. GMCA-DOF-09. 20. S+N 2015. Cutting of ALLEVYN variants. Internal Report. DS/14/318/R. 21. Lee YJ, Kim JY, Shin WY, Yeon YH. Use of prophylactic silicone adhesive dressings for maintaining skin integrity in intensive care unit patients: A randomised controlled trial. Int Wound J. 2019;16(Suppl. 1): 36-42. 22. S+N 2022. Methodology for the reduction in packaging material of ALLEVYN[®] bordered dressings. Internal Report. CSDAWM22045.



**Menos residuos
+ más cuidados**

