多彩な製品ラインナップで創傷管理をサポートします

Smith+Nephew

スミス・アンド・ネフュー
創傷管理製品カタログ



2026年10月版

創の状態に応じた薬剤・創傷材料の選択（感染創・壊死組織・出血・ポケットのある創）

感 染



壊死組織/ポケット・空洞のある創

渗出液多量



乾 燥



出 血



ポケット／空洞





カデックス
軟膏0.9%



カデックス
軟膏分包
45mg／153mg



イントラサイト
ジェル システム



アルゴダーム
トリオニック

感染創・壊死組織のある創

製品詳細・解説は
コチラ！▶

感染している創や壊死組織のある（渗出液が多い）創に使用します。医薬品

目的 ■感染コントロール ■渗出液コントロール ■壊死組織除去

使用方法



創面が隠れる程度（厚さ約3mm）に塗布します。




吸収パッド（メロリン®等）で創面を覆います。



汚染される場合は、フィルムでカバーします。

交換時期の目安



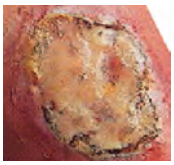

通常1日1回交換、茶色はヨウ素の色で、渗出液を吸収し、ヨウ素を放出すると白くなります。交換時に全体が白くなっていたら、1日2回交換します。

渗出液の吸収、
持続的な殺菌作用により治癒を促進

カデックス◊ 軟膏0.9%



カデックス 軟膏分包 45mg／153mg



乾燥した壊死組織のある創

製品詳細・解説は
コチラ！▶

乾燥した壊死組織に水分を供給し、自己融解を促進させます。

目的 ■壊死組織除去・清浄化作用

使用方法



オレンジ色のキャップをはずし、ノズルの先端を折り取ります。



容器の底部を軽く押して創部に直接塗布します。



塗布したジェルの上からフィルムでカバーします。



渗出液がある場合は、吸収パッド（メロリン等）を使用します。

交換時期の目安



効果的な湿潤環境を維持するため適宜交換し、少なくとも、3日ごとに交換します。

水分バランスで
治癒環境を整える

**イントラサイト
ジェル システム**




ポケット・空洞がある創、出血している創

製品詳細・解説は
コチラ！▶

渗出液の吸収・ドレナージにより湿潤環境を提供、治癒を促進します。

目的 ■容易な操作性 ■止血作用 ■渗出液コントロールと創のドレナージ

使用方法

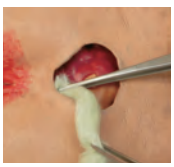

〈ロープタイプの場合〉
奥行きに合わせて挿入します。渗出液が少量の場合は、生理食塩液で事前に湿らせて使用します。



〈シートタイプの場合〉
創サイズに合わせてシートのサイズを選択します。



渗出液が少量の場合はフィルムやガーゼ、渗出液が多量の場合は吸収パッド（メロリン等）でカバーします。

交換時期の目安



感染の疑いがない場合、二次ドレッシングに渗出液の広がりが観察された時点で交換します（感染に注意を払う必要がある場合は毎日交換します）。



亜鉛、マンガンを
含有。

○星型形状繊維に由来する毛細管現象により、吸収性・ドレナージ性に優れます。
○適度な湿潤環境を維持し、治癒を促進します。
○アルギン酸カルシウムのため、止血作用を促進します。
○型崩れしにくく、創部に繊維を残さず除去できます。

型崩れしにくく
除去しやすい。渗出液の
吸収を期待する創に

**アルゴダーム
トリオニック**



創の状態に応じた局所陰圧閉鎖療法・創傷材料の選択（肉芽形成～表皮形成の時期）

肉芽形成から表皮形成の時期

渗出液多量　渗出液中等量　渗出液少量





アルゴダーム トリオニック　ハイドロサイト ライフ　ハイドロサイト プラス　ハイドロサイト AD プラス　ハイドロサイト ジェントル 銀　ハイドロサイト AD ジェントル　ハイドロサイト 薄型　ソフトフォーム ドレッシング



RENASYS



PICO 創傷治療システム

症例提供：大阪府済生会吹田病院　間宮 直子　皮膚・排泄ケア認定看護師

局所陰圧閉鎖療法

Negative Pressure Wound Therapy：NPWT

RENASYS TOUCH 使用方法はコチラ！▶

RENASYS EDGE 使用方法はコチラ！▶

PICO 使用方法はコチラ！▶

適応疾患に対し、管理された陰圧を付加し、創の保護、肉芽形成の促進、滲出液と感染性老廃物の除去を図り、創傷治癒を促進させます。

適応疾患　既存治療に奏効しない、或いは奏効しないと考えられる難治性創傷。

入院

RENASYS◊ EDGE 陰圧維持管理装置

医療現場の管理負担を軽減



RENASYS TOUCH 創傷治療システム

直感的なインターフェイス



滲出液量：多量～中等量 💧💧💧

NPWTが創傷にもたらす効果



入院　外来　在宅

PICO◊ 創傷治療システム

創傷治療の可能性をさらに広げる単回使用の陰圧創傷治療システム



滲出液量：中等量～少量 💧💧

RENASYS フィラーの選択



フォームフィラー

- **物理的な創の引き寄せ効果が大きい**
  → 筋膜切開創など創縁の引き寄せが必要な創傷
- **迅速で厚みのある肉芽形成を促進**
  → 深い皮膚欠損創
- **粘性のある滲出液の管理が可能**
  → 褥瘡などの慢性創傷



コットンフィラー

- **簡便にフィラーを充填できる**
  → 広範囲の創傷・凹凸の創底や複雑な形状の創傷
  創外固定のピンがある創傷
- **フィラーへのイングロースが少なく疼痛が軽減**
  → 痛みがある場合
- **急激な肉芽形成がなく瘢痕が少ない**
  → 整容性を求める場合・関節部の創傷

PICO 創傷治療システムフィラーの選択

- 創傷が深い（およそ0.5cm以上）場合などは、陰圧を適切に創底に提供するためにフォームフィラーを併用することを検討
- **2cm以上の場合はフォームフィラーを必ず併用**

● 創傷に凹凸がある

● ポケットがある

● 創口が小さい

肉芽形成の時期　滲出液：多～中等量

製品詳細・解説はコチラ！▶

ハイドロサイトシリーズで最もパッドの吸収力が高い、5層構造の高機能ドレッシングです。

目的　■過剰な滲出液の吸収　■適切な湿潤環境の維持　■骨突出部を保護

使用方法



透明のフィルムを剥がしながら、創の中央部分に合わせます。




中央から外に向かってドレッシング材をなじませ、フィルムを全て取り除きます。

交換時期の目安



- 使用開始時期は頻回に観察してください。
- マスキング層の外側の不織布超吸収パッドから滲出液の吸収状態が確認できます。
- 不織布超吸収パッドの75%以上が滲出液を吸収した時を目安に交換してください。
- 滲出液の吸収状態に関わらず最長7日間、仙骨部の場合は5日間を限度として交換してください。

滲出液の吸収力に優れ、頻回な処置が困難な在宅にも適しています

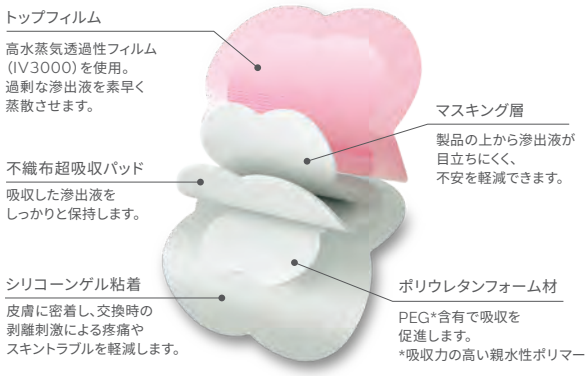

ハイドロサイト◇ライフ



標準型　貼り方はコチラ！



仙骨用　貼り方はコチラ！



ヒール用　貼り方はコチラ！


肉芽形成の時期　滲出液：多～中等量

製品詳細・解説はコチラ！▶

吸水性に優れたポリウレタンフォームにより、過剰な滲出液を吸収します。

目的　■過剰な滲出液の吸収　■適切な湿潤環境の維持　■感染リスクの軽減（銀含有）

使用方法

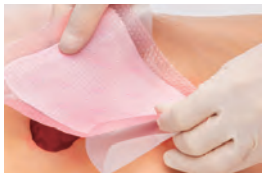

創周囲の健常皮膚まで被覆できるサイズを選択し、透明フィルムを剥がして、白い面で創部を被覆します。



ドレッシングの端がしわにならないように本品に創部を密着させてください。

交換時期の目安

滲出液の漏れが起こる前、創部・患部より剥がれた場合に交換します。また滲出液が端から1.5cm付近までに広がった時点を交換の目安とします（使い始めは、こまめに滲出液の状態を確認します）。

貼付期間は滲出液の吸収状態に関わらず最長7日間、仙骨部の場合は5日間を限度として交換してください。

自由にカットでき、剥がしやすい非固着性



自由に 固定
（粘着剤なし）
ハイドロサイト プラス

しっかり固定できるアクリル系粘着剤



しっかり 固定
（アクリル系粘着剤）
ハイドロサイト AD プラス

肌にやさしいシリコーン粘着剤



やさしく 固定
（シリコーンゲル粘着剤）
ハイドロサイト AD ジェントル

シリコーン粘着剤に銀をプラス



やさしく 固定
（シリコーンゲル粘着剤）
ハイドロサイト ジェントル 銀

表皮形成の時期　滲出液：中～少量

製品詳細・解説はコチラ！▶

浅い創（水疱・びらんなど）で滲出液を吸収し、適度な湿潤環境を保持します。

目的　■適切な湿潤環境の提供

使用方法



裏紙を剥がしながら創部を直接覆い、皮膚になじませます。



剥がれやすい場合は、フィルム等で固定します。


交換時期の目安

ドレッシング材の表面から滲出液の吸収状態を観察し、滲出液の漏れが起こる前に交換します。貼付期間は滲出液の吸収状態に関わらず、最長5日間を限度とします。

○ゲル化せず、創部をクリーンな状態に保ちます。

○自着性で（粘着剤不使用）、剥離時の皮膚への負担を軽減します。

○薄くて伸縮性があり、可動部にもよく追従します。

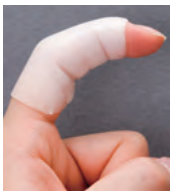



伸縮性に優れ、
脆弱な皮膚への刺激が少ない
ハイドロサイト 薄型

表皮形成の時期　滲出液：少量

微粘着のシリコーンゲルにより、剥離時の皮膚への負担を軽減します。

目的　■適切な湿潤環境の提供、創部の保護

使用方法



透明フィルムを剥がし、創部を直接覆い、皮膚になじませます。



剥がれやすい場合は、テープや伸縮性包帯等で固定します。

交換時期の目安

滲出液の漏れが起こる前、創部・患部より剥がれた場合に交換します。貼付期間は滲出液の吸収状態に関わらず、最長7日間を限度とします。

○約2mmの薄さで、身体の動きにしなやかに追従します。

○トップフィルムがなく、通気性に優れた使用感です。

○滲出液の漏れが起こる場合は、吸収パッド（メロリン等）でカバーします。






シリコーンゲル粘着で
剥離時の刺激が少ない
ソフトフォーム ドレッシング

軟膏処置時や二次ドレッシングとして使用する三層構造の高機能ガーゼ

創部に固着しにくい吸収性ガーゼ


メロリン◊

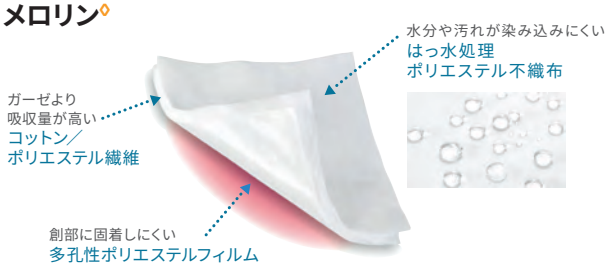

皮膚が脆弱な方のケアに 衛生材料

シリコーンゲル粘着剤を採用した
ロールフィルム

オプサイト ジェントルロール

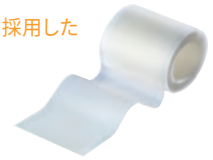


製品詳細・解説はコチラ！

シリコーンゲル粘着剤が皮膚に密着するので、交換時の剥離刺激による疼痛やスキントラブルを軽減します。

固定フィルムに最適 衛生材料

手袋装着時も操作しやすい
ロールフィルム

オプサイト クイックロール 2way

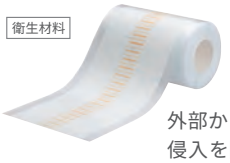

製品詳細・解説はコチラ！

外部からの水や排泄物、バクテリアの侵入を防ぎます。また、水蒸気透過性を有するため、皮膚のムレを抑えます。

ハイクオリティ絆創膏

ハイドロ ジェントルエイド◊

- ○ふんわりパッドで傷を保護
- ○低刺激のシリコーンゲル粘着剤
- ○最長7日間*継続して使用可能
- ○シワになっても貼り直しが可能

* 創を観察し、滲出液の量に応じて適宜交換してください。



健常皮膚の保護に多層構造の保護パッド 衛生材料

アレビン◊ ライフ

5層構造のパッドにより、ズレ、摩擦、外圧などから皮膚や骨突出部を保護します。



製品詳細・解説はコチラ！



失禁等からの汚染予防や保湿によるスキンケア 化粧品

セキューラ◊ シリーズ

製品詳細・解説はコチラ！



保護 保湿

撥水性の被膜により皮膚をまもります。

撥水性ジェル
セキューラ PO



保湿 保護

うるおいを与えて皮膚を保護。撥水効果も備えます。

保湿クリーム
セキューラ DC



保湿

無香料
塗った上から
テープも貼付可能

全身の皮膚を乾燥からまもります。

保湿ローション
セキューラ ML



洗浄

肌と同じ弱酸性

汚れを手早く落とします。保湿効果も備えています。

弱酸性洗浄料
セキューラ CL

剥離刺激から皮膚を保護 衛生材料

セキューラ ノンアルコール 被膜 スプレー

さっとスプレーでき、皮膚を保護



セキューラ ノンアルコール 被膜 滅菌済

スティックタイプ

手が汚れず、狭い部位でも塗りやすい



ナプキンタイプ

ピンポイントに塗れて、携帯にも便利



リムーブ（剥離剤）

やさしく剥がす



術後縫合創やカテーテル管理に

親水性ポリウレタンREACTIC◊採用製品ラインナップ

高水蒸気透過性
トランスペアレントドレッシング

IV3000 ドレッシング

カテーテル等の固定から創傷保護まで



吸収フォーム付
トランスペアレントドレッシング

オプサイト◊ POST-OPビジブル

創の観察が可能で吸収性にも優れたドレッシング



吸収パッド付
トランスペアレントドレッシング

オプサイト Post-Op Ⅱ

吸収パッド付き透明ドレッシングで創面を保護



高い伸縮性と粘着力を持った皮膚接合用テープ

ロイコストリップ

低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
創傷部からの血液・滲出液の透過性に優れています。




瘢痕部の保護に

シリコンジェルシート

シカケア

外傷・熱傷・ニキビの痕、手術や抜糸の痕が赤くなったり、盛り上がった部位を保護します。

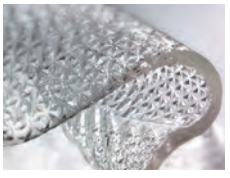



洗って、繰り返し使用可能



肥厚性瘢痕やケロイドの保護



マスク装着によるスキントラブル予防

※口や鼻の周囲に使用する場合、気道を閉塞しないよう次の点にご注意ください。
・口の中に入らないよう大きめのサイズに切ってご使用ください。
・貼付した部位からずれていないことを定期的に確認してください。

IV3000 ドレッシング

一般医療機器
救急絆創膏
JMDN コード：34864000
カテーテル被覆・保護材
JMDN コード：70444000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0001

〈ワンハンド・タイプ〉

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
4654	4×5	100
4007※	6×7	100
4008※	10×12	50

※固定テープ・記録ラベル付き

〈フレームデリバリー・タイプ〉

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
59410082	6×7	100
59410882	10×12	50

※貼付日などの記録ラベル付き

〈リジッドハンドル・タイプ〉

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
4925	10×14※	10
4973	10×14※	50
4649	10×20	50

※離けい紙部分を含む

〈ポーテッド・タイプ〉

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
4006	7×9	100
66004009	9×12	50
66004011	5×6	100

※固定テープ・記録ラベル付き

アルゴダーム トリオニック

高度管理医療機器
二次治癒親水性ゲル化創傷被覆・保護材
JMDN コード：43186003
医療機器承認番号：22500BZ100009A02

保険適用

製品番号	サイズ（cm）	タイプ	保険算定面積（㎠）	枚／箱
66929362	5×5	シートタイプ	25	10
66929361	9.5×9.5	シートタイプ	90.25	10
66929360	10×20	シートタイプ	200	10
66929363	30cm,2g	ロープタイプ	158	6

アレビン® ライフ

衛生材料

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
66801068	12.9×12.9	10
66801069	15.4×15.4	10
66801070	21×21	10
66801304	かかと用（25×25.2）	5
66801306	仙骨用小（17.2×17.5）	10
66801307	仙骨用大（21.6×23）	10

イントラサイト ジェル システム

高度管理医療機器
二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材
JMDN コード：34082003
医療機器承認番号：21000BZY00358000

〈アプリパック〉

保険適用

製品番号	サイズ（g）	個／箱
7308	8	10
7311	15	10
7313	25	10

オプサイト® クイックロール 2way

衛生材料

製品番号	サイズ	巻／箱
66800339	5cm×12m	1
66800340	10cm×12m	1
66800341	15cm×12m	1

オプサイト ジェントルロール

衛生材料

製品番号	サイズ	巻／箱
66801195	2.5cm×5m	1
66801196	5cm×5m	1
66801197	10cm×5m	1

オプサイト POST-OP ビジブル

一般医療機器
救急絆創膏
JMDN コード：34864000
カテーテル被覆・保護材
JMDN コード：70444000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0009

製品番号	サイズ（cm） フィルム部	パッド部	枚／箱
66800143	10.5×9	5×3.5	20
66800144	16×11	10.5×5.7	20
66800145	21×11	15.5×5.7	20
66800146	26×11	21×5.7	20
66800147	31×11	26×5.7	20
66800148	35×11	30×5.7	20

オプサイト Post-Op Ⅱ

一般医療機器
救急絆創膏
JMDN コード：34864000
カテーテル被覆・保護材
JMDN コード：70444000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0002

製品番号	サイズ（cm） フィルム部	パッド部	枚／箱
66000708	6.5×5	4×2.5	100
66000709	9.5×8.5	7.3×3.7	20
66000710	12×10	7.5×5	10
66000712	15.5×8.5	12×3.7	20
66000713	20×10	15×5.5	20
66000714	25×10	20×5.7	20
66000715	30×10	25×5.7	20
66000716	35×10	30×5.7	20

カデックス® 軟膏0.9% カデックス 軟膏分包 45mg / 153mg

カデックス軟膏 0.9%　ヨウ素含有軟膏
承認番号：21300AMY00072000
カデックス軟膏分包 45mg　ヨウ素含有軟膏
承認番号：22100AMX00241000
カデックス軟膏分包 153mg　ヨウ素含有軟膏
承認番号：22100AMX00243000

日本標準商品分類番号：872699

医薬品

カデックス 軟膏0.9%

薬価基準収載

製品番号	容量（g）
66390186	40
66803090	100

カデックス 軟膏分包 45mg / 153mg

製品番号	容量	1枚のサイズ（cm）
66800053	45mg	5g(4×6)
66800055	153mg	17g(8×10)

シカケア

一般医療機器
皮膚バリア粘着プレート
JMDN コード：31071000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0007

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
66250704	6×12	1
66250706	12×15	1

セキューラ® CL

弱酸性洗浄料

化粧品

製品番号	容量（mL）	本／箱
59430900	236	1

セキューラ DC

保湿クリーム

化粧品

製品番号	容量（g）	本／箱
59432200	114	1

セキューラ ML

保湿ローション

化粧品

製品番号	容量（mL）	本／箱
59433400	236	1
66800015	60	1

セキューラ PO

撥水性ジェル

化粧品

製品番号	容量（g）	本／箱
59431500	70	1
59431600	159	1

セキューラ ノンアルコール 被膜

販売名：ノンアルコール スキンプレップ
一般医療機器
液体包帯
JMDN コード：33584000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0013

製品番号	タイプ	容量（mL）	本・枚／箱
66800711	スティックタイプ	3	50本
66800787	スティックタイプ	3	5本
66800712	ナプキンタイプ	1	50枚

医薬品及び医療機器の使用にあたっては、添付文書をよく読み、用法及び用量／使用方法、適用上の注意／使用上の注意を守って正しくお使いください。

セキューラ ノンアルコール 被膜 スプレー

販売名：ノンアルコール スキンプレップ スプレー
一般医療機器
液体包帯
JMDN コード：33584000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0014

製品番号	容量(mL)	本／箱
66807693	28	1

ソフトフォーム ドレッシング

管理医療機器
局所管理フォーム状創傷被覆・保護材
JMDN コード：11323002
医療機器届出番号：303ADBZX00025000

保険適用

製品番号	サイズ（cm）	保険算定面積（㎠）	枚・本／箱
33000137	15×30	450	10
33000172	15×100	1500	2

ハイドロサイト◊ 薄型

管理医療機器
局所管理フォーム状創傷被覆・保護材
JMDN コード：11323002
医療機器承認番号：21900BZX00491000

保険適用

製品番号	サイズ(cm)	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66390872	5×6	30	10
66390873	10×10	100	5

ハイドロサイト AD ジェントル

高度管理医療機器
二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材
JMDN コード：11323003
医療機器承認番号：22100BZX00942000

保険適用

製品番号	サイズ(cm)	パッド部サイズ(cm)	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66800538	7.5×7.5	5×5	25	10
66800539	10×10	7.5×7.5	56.25	10
66800540	12.5×12.5	10×10	100	10
66800541	17.5×17.5	15×15	225	10
66800900	10×20	7×17	119	10

〈凹凸のある部位用〉

製品番号	サイズ（cm）	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66800959	17.1×17.9(マルチサイト)	99.94	10

〈仙骨用〉

製品番号	サイズ（cm）	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66800898	17.1×16.8(仙骨用小)	96.33	10
66801031	21.6×23(仙骨用大)	182	10

ハイドロサイト AD プラス

高度管理医療機器
二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材
JMDN コード：11323003
医療機器承認番号：22100BZX01096000

保険適用

製品番号	サイズ(cm)	パッド部サイズ(cm)	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66800674	7.5×7.5	5×5	25	10
66800675	12.5×12.5	10×10	100	10
66800688	7.5×7.5	5×5	25	3
66800689	12.5×12.5	10×10	100	3

ハイドロサイト ジェントル 銀

高度管理医療機器
抗菌性創傷被覆・保護材
JMDN コード：34614000
二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材
JMDN コード：11323003
医療機器承認番号：22500BZX00409000

〈標準型〉

保険適用

製品番号	サイズ(cm)	パッド部サイズ(cm)	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66801380	7.5×7.5	5×5	25	10
66801381	10×10	7.5×7.5	56.25	10
66801382	12.5×12.5	10×10	100	10
66801383	17.5×17.5	15×15	225	10

ハイドロサイト プラス

高度管理医療機器
二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材
JMDN コード：11323003
医療機器承認番号：22100BZX01097000

※折りたたんだ長径と短径(cm)

保険適用

製品番号	サイズ(cm)	保険算定面積(㎠)	枚(巻)／箱
66800678	5×5	25	10
66800679	10×10	100	10
66800681	10×20	200	10
66800682	20×20	400	10
66800686	5×5	25	3
66800687	10×10	100	3
66000663	40×70	2,800	1

〈ヒールタイプ〉

製品番号	サイズ(cm)	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66800684	13.5×10.5※	141.75	5
66800691	13.5×10.5※	141.75	3

ハイドロサイト ライフ

高度管理医療機器
二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材
JMDN コード：11323003
医療機器承認番号：22600BZX00209000

〈標準型〉

保険適用

製品番号	サイズ(cm)	パッド部サイズ(cm)	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66391068	12.9×12.9	7.6×7.6	57.76	10
66391069	15.4×15.4	10.2×10.2	104.04	10
66391070	21×21	15.4×15.4	237.16	10

〈ヒール用〉

製品番号	サイズ（cm）	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66391304	25×25.2	242.73	5

〈仙骨用〉

製品番号	サイズ（cm）	保険算定面積(㎠)	枚／箱
66391306	17.2×17.5	96.33	10
66391307	21.6×23	182.25	10

ハイドロ ジェントルエイド◊

一般医療機器
救急絆創膏
JMDN コード：34864000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0016

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
66800833	5×5	10
66800834	7.5×7.5	10
66800835	10×10	10
66800840	15×15	10
66800836	5.5×12	10
66800837	8×15	10
66801012	10×20	10

PICO◊ 創傷治療システム

販売名：PICO 創傷治療システム
高度管理医療機器
単回使用陰圧創傷治療システム
JMDN コード：58202003
医療機器承認番号：22600BZX00226000

PICO 7 創傷治療システム

保険適用

製品番号	サイズ(cm)	パッドサイズ(cm)
66802000	マルチサイト小（15×20）	122㎠
66802001	マルチサイト大（20×25）	248㎠
66802002	10×20	5.6×15
66802003	10×30	5.6×25
66802004	10×40	5.6×35
66802005	15×15	10×10
66802006	15×20	10×15
66802007	15×30	10×25
66802008	20×20	15×15
66802009	25×25	20×20

※陰圧維持管理装置1個、PICOドレッシング2枚、
単三アルカリ電池2本、固定フィルムが入っています。

PICO 5 パックドレッシング

保険適用

製品番号	サイズ(cm)	パッドサイズ(cm)
66802020	マルチサイト小（15×20）	122㎠
66802021	マルチサイト大（20×25）	248㎠
66802022	10×20	5.6×15
66802023	10×30	5.6×25
66802024	10×40	5.6×35
66802025	15×15	10×10
66802026	15×20	10×15
66802027	15×30	10×25
66802028	20×20	15×15
66802029	25×25	20×20

※PICOドレッシングの5枚パックです。

医薬品及び医療機器の使用にあたっては、添付文書をよく読み、用法及び用量／使用方法、適用上の注意／使用上の注意を守って正しくお使いください。

メロリン◊
メロリン（未滅菌）

一般医療機器
医療用不織布
JMDN コード：34655000
一般医療機器
手術用被覆・保護材
JMDN コード：34654000
医療機器届出番号
メロリン
13B1X10222WC0006
メロリン（未滅菌）
13B1X10222WC0005

〈メロリン〉

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
66974932	5×5	25
66974933	10×10	10
66974940	5×5	100
66974941	10×10	100
66974939	10×20	100

〈メロリン 未滅菌〉

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
66974942	10×10	150
66974943	10×20	75
66974944	20×30	25

製品番号	サイズ（cm）	巻／袋
66974930	50×700（ロールタイプ）	1

RENASYS◊ EDGE
陰圧維持管理装置

高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
陰圧創傷治療システム
JMDN コード：20395000
医療機器承認番号：30700BZX00179000

RENASYS EDGE キャニスター

製品番号	容量／規格	個／箱
66803139	300mL ゲル化剤入り	1
66803140	800mL ゲル化剤入り	1
66803141	300mL ゲル化剤なし	1

RENASYS
創傷治療システム

高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
陰圧創傷治療システム
JMDN コード：20395000
医療機器承認番号：22400BZX00276000

RENASYS TOUCH キャニスター

製品番号	容量／規格	個／箱
66801273	300mL ゲル化剤入り	1
66801274	800mL ゲル化剤入り	1
66801275	300mL ゲル化剤なし	1

RENASYS フォームフィラーキット　保険適用

製品番号	サイズ（cm）	枚／箱
66800794	S 10×8×3	1
66800795	M 20×12.5×3	1
66800796	L 25×15×3	1

RENASYS コットンフィラーキット　保険適用

製品番号	サイズ（cm）	枚・フィラー入数
66801085	S 15×17	2枚
66801086	M 11.4×370	1本
66801087	L 11.4×370	2本

RENASYS ドレーンアクセサリー
〈10mm フラットタイプ〉

製品番号	個/箱
66802252	1

〈15Fr チャネルタイプ〉

製品番号	個/箱
66802253	1

リムーブ

衛生材料

製品番号	タイプ	数／箱
403100	紙ナプキンタイプ	50枚
403379	ボトルタイプ	236mL／ポリ容器

ロイコストリップ

一般医療機器
皮膚接合用テープ
JMDN コード：70438000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0010

製品番号	サイズ（mm）	袋／箱
66002880	13×102	50
66002881	26×102	25
66002876	4×38	50
66002903	4×76	50
66002879	6.4×102	50
66002878	6.4×76	50

コンシューマー向け製品

ハイドロ
ジェントルエイド◊

一般医療機器
救急絆創膏
JMDN コード：34864000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0016

製品番号	サイズ（cm）	枚／パック
33000157	5×5	3
33000158	7.5×7.5	3
33000159	10×10	3

オプサイト◊
ポスト-オプ

一般医療機器
救急絆創膏
JMDN コード：34864000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0018

製品番号	サイズ（cm）	枚／パック
33000160	6.5×5	5
33000161	9.5×8.5	3

メロリン◊

販売名：メロリン Home care
一般医療機器
医療用不織布
JMDN コード：34655000
医療機器届出番号：13B1X10222WC0017

製品番号	サイズ（cm）	枚／パック
33000162	5×5	5
33000163	10×10	3

※コンシューマー向け製品については、代理店様は 10 パック／箱ごとのお取引となります。

医薬品及び医療機器の使用にあたっては、添付文書をよく読み、用法及び用量／使用方法、適用上の注意／使用上の注意を守って正しくお使いください。

製造販売元
スミス・アンド・ネフュー株式会社　ウンドマネジメント事業部
〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号　TEL.03-5403-8830

札幌営業所　TEL.011-736-9596
仙台営業所　TEL.022-276-6726
東京営業所　TEL.03-5403-8915
名古屋営業所　TEL.052-221-1407
大阪営業所　TEL.06-6399-3303
広島営業所　TEL.082-502-7322
福岡営業所　TEL.092-452-0142

https://www.smith-nephew.com/ja-jp

◊Trademark of Smith+Nephew
アルゴダームトリオニックは Les laboratoires Brothier の登録商標です。
© 2010-2026 Smith+Nephew