

ロイコストリップ[◇]

ウンドクロージャーストリップ

 smith&nephew
LEUKOSTRIP[◇]


優れた伸縮性と粘着力を実現した
皮膚接合用テープ



傷の治癒過程に合わせて考えられた、 ウンドクロージャーストリップ。

【強い粘着力】

優れた粘着力と伸縮性により、哆開、離開の不安を解消しました。低アレルギー性の粘着剤を使用しています。

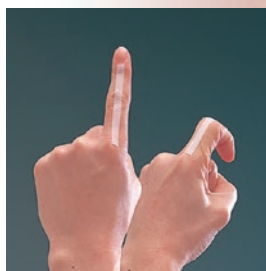

優れた粘着力と伸縮性

【適度な伸縮性】

創傷治癒の過程で起こるさまざまな浮腫の状態に合わせて伸縮し、一定の張力で創縁を密着します。



伸縮性のあるロイコストリップ




創傷治癒の過程で起こる浮腫に対して、ロイコストリップは優れた伸縮性で、常に一定の張力を維持します。

浮腫の回復とともにロイコストリップは、貼付時と同じ張力を創部に与え、きれいな予後が望めます。


【優れた透過性】

創傷部からの血液・滲出液の透過性に優れています。

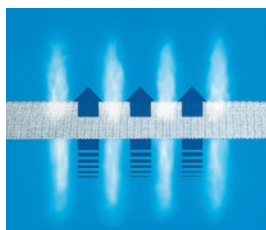


透過性に優れた素材/創傷部からの血液・滲出液を透過します。

拡大写真

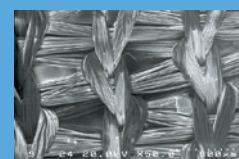

表面 (ポリアミド織布)

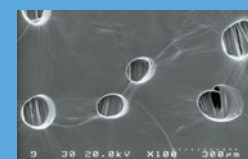

裏面 (多孔性の粘着面)

主な用途

- 皮下縫合後の表皮接合に
- けが、小切開後の接合に
- 抜糸、半抜糸後の補強材に
- その他の縫合材料と併用して

製品番号	サイズ	入数/袋	袋数/箱
66002876	4mm × 38mm	8本	
66002903	4mm × 76mm	4本	
66002878	6.4mm × 76mm	3本	50袋
66002879	6.4mm × 102mm	5本	
66002880	13mm × 102mm	6本	
66002881	26mm × 102mm	4本	25袋

【禁忌・禁止】

再使用禁止

本品を貼付する皮膚に血液、油分(軟膏・クリーム含む)、水分等が付着している場合や体毛が濃い部分には、そのまま上から貼付しないこと。[本品の粘着力が低下したり、そのまま貼付すると十分に粘着せず、貼付中に剥がれてしまう恐れがある。]

感染創(膿が出ている、発赤、発熱、腫れ、悪臭などの異常がある傷)もしくは感染が疑われる部位には、使用しないこと。[傷の悪化、感染の悪化、治癒の遅延につながる可能性がある。]

※「使用方法及び使用上の注意」等の詳細については添付文書をご参照ください。



販売名: ロイコストリップ
一般医療機器
皮膚接合用テープ
JMDNコード: 70438000
届出番号: 13B1X10222WC0010
ガンマ線滅菌済

製造発売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830 <http://www.smith-nephew.com/japan/>

° Trademark of Smith & Nephew.

© 2012-2017 Smith & Nephew KK

LS-1
201701-1