



Smith+Nephew

FAST-FIX[◇] 360

Meniscal Repair System

FAST-FIX[◇] 360



画期的な進化を遂げた新しい半月板縫合システム

FAST-FIX[◇] 360


プッシュアウトタイプのインプラント留置システム

- ディプロイメントノブを押し出すことによって、インプラント留置が可能です。
 - プッシュアウトタイプ採用により、半月板への刺入距離を最小限にすることができるため、周りの神経血管への損傷リスクを低減させることが可能です。
 - ニードルの打ち直しが可能なため適切な位置での縫合が可能です。
- 360°どこからでも操作できるハンドルは、どのような位置からでもすばやく簡単にインプラントの留置ができます。



カーブ・リバーズカーブのニードル形状



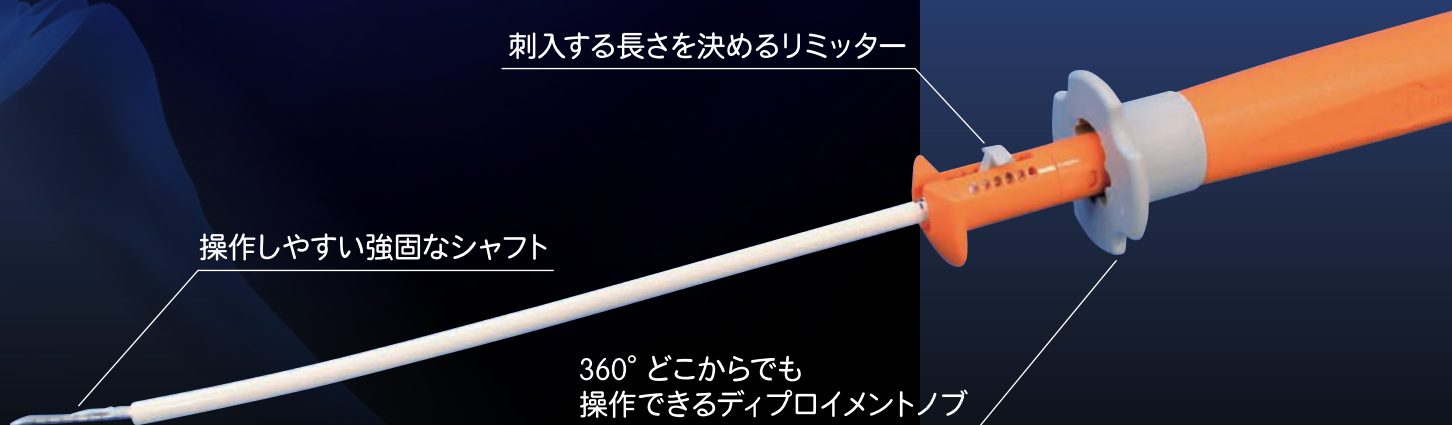

強固なシャフトと小さくなったインプラント

- シャフトが強固になったことにより、ニードルの曲がりを最小限に抑え、操作性が向上しました。




FAST-FIX 360



Ultra FAST-FIX

- 新しいインプラントは、従来のFAST-FIXより約40%も小さくなりました。

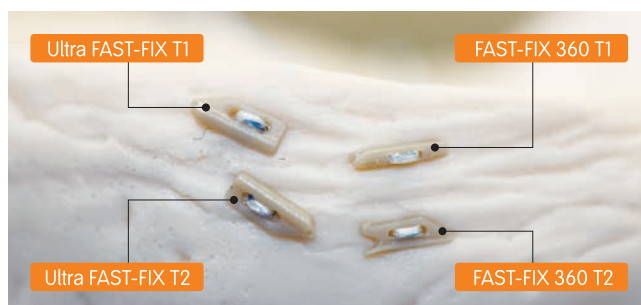

随時調節可能なリミッターとレーザーマークつきニードル

- ボタンによる調節機能はいつでも刺入距離を適切に調整できます。





- ニードル先端のレーザーマークで刺入距離の確認が可能です。



ULTRABRAID[®] 縫合糸2-0採用

- 強固なロックが可能で結紮部の弛みや滑りが少なく、確実な組織固定が期待できます。
- ロープロファイルな修復が可能になりました。

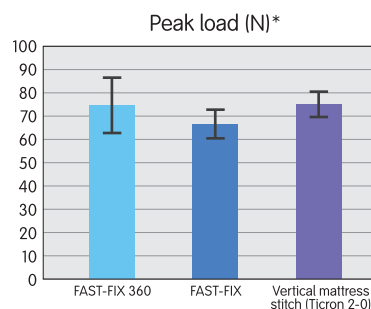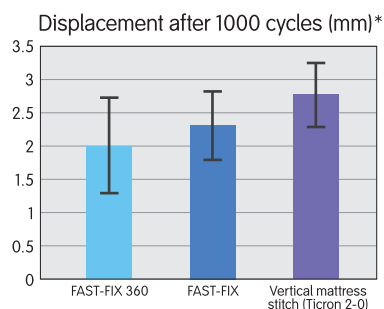

*社内資料：ITR-3969, ITR-4080

オーダーインフォメーション

カタログ番号	製品名
72202468	FAST-FIX 360 カーブ
72202469	FAST-FIX 360 リバースカーブ
72202674	FAST-FIX 360 ストレート ノットプッシャー／スーチャーカッター、スロットカニューラ セット
7210977	スロットカニューラ
015186	メニスカルデプスプローベ
014549	45° ダイヤモンドラスプ
014550	90° ダイヤモンドラスプ
011703	滅菌トレイ、小



スミス・アンド・ネフュー株式会社
スポーツメディスン事業部
<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

®Trademark of Smith & Nephew.
©2017 Smith & Nephew KK

承認番号: 22400BZX00370000
販売名: FAST-FIX 360 システム
認証番号: 222ADBZX00087000
販売名: FAST-FIX 360 ノットプッシャー / スーチャーカッター
届出番号: 13B1X10222SC0018
販売名: スロット・カニューラ
届出番号: 13B1X10222SD002A
販売名: 半月板修復用手術器械
届出番号: 13B1X10222SC0011
販売名: SN鏡視下手術器械(やすり)