

# ALL TEARS ALL REPAIRS - TUTTE LE RIPARAZIONI PER TUTTE LE LESIONI

Soluzioni complete per salvare il menisco



**NOVOSTITCH° PRO**  
Sistema di riparazione  
meniscale \*\*



**MENISCAL ROOT**  
Sistema di  
riparazione




**FIRSTPASS° MINI**  
Linea di passa-suture



**FAST-FIX° 360**  
Sistema di  
riparazione  
meniscale

**ULTRA FAST-FIX**  
Sistema di  
riparazione  
meniscale

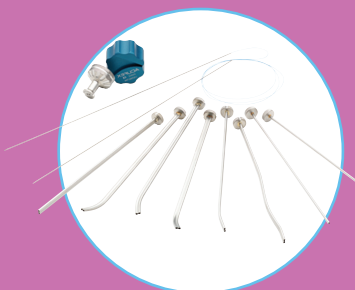

**MENISCAL STITCHER**  
Sistema di riparazione


**MENISCUS MENDER II**  
Sistema di riparazione



**WEREWOLF°  
FLOW 50°**  
Ablatore



**DYONICS°  
PLATINUM**  
Lame curve

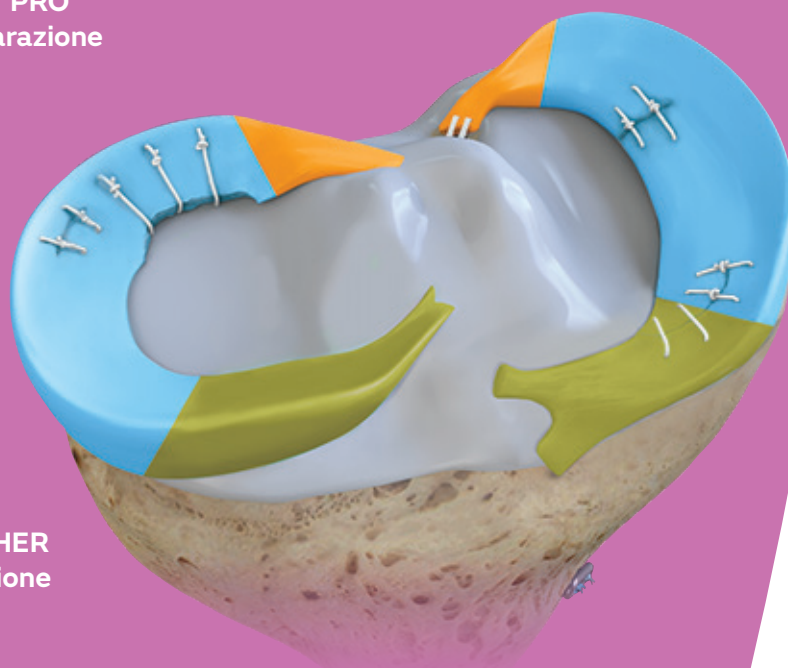

# Informazioni per gli ordini

## FAST-FIX® 360

Codice N.	Descrizione
72202467	FAST-FIX 360, diritto
72202468	FAST-FIX 360, curvo
72202469	FAST-FIX 360, curvo reverse
72202674	Set diritto con spinginodo/tagliasuture e cannula scanalata, monouso
72202675	Set curvo con spinginodo/tagliasuture e cannula scanalata, monouso

## Strumentario

Codice N.	Descrizione
015186	Sonda di profondità meniscale, riutilizzabile
014549	Raspa diamantata a 45°, riutilizzabile
014550	Raspa diamantata a 90°, riutilizzabile
7210977	Cannula scanalata, riutilizzabile
7209950	Infilasuture, sterile, scatola da 10

Per saperne di più accedi a [AllTearsAllRepairs.com](http://AllTearsAllRepairs.com)

### Fabbricante

Sports Medicine  
Smith & Nephew, Inc.  
150 Minuteman Road  
Andover, MA 01810

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

T +978 749 1000  
Assistenza clienti USA:  
+1 800 343 5717

### Contatto

#### Smith & Nephew, S.r.l.

Via De Capitani 2A  
20864 Agrate Brianza MB Italia  
HYPERLINK "http://www.smith-nephew.it"  
www.smith-nephew.it  
T +39 039 60941  
F +39 039 651535

®Marchio commerciale di Smith & Nephew.

©2019 Smith & Nephew. Tutti i diritti riservati.

Riservato al personale medico.


Tutti i marchi commerciali sono attribuiti ai rispettivi titolari.

Stampato negli U.S.A. 04745-it V3 11/19

1. Smith & Nephew 2019. Report ad esito delle evidenze EO/SPM/FASTFIX/002/v2 e EO/SPM/FASTFIX/003/v2. 2. Smith & Nephew 2010. Performance biomeccanica. 10600596 Rev. A. 3. Smith & Nephew 2015. Convalida delle esigenze dell'utilizzatore. 15000994 Rev. E. (rispetto a ULTRA FAST-FIX) 4. Briggs KK, Steadman JR, Hay CJ, Hines SL. Lysholm Score and Tegner Activity Level in Individuals With Normal Knees. AJSM.2009;37:898-901. 5. Anderson AF, Irrgang JJ, Kocher MS, et al. The International Knee Documentation Committee Subjective Knee Evaluation Form. AJSM.2006;34(1):128-135.

\* In base ai dati di vendita di FAST-FIX 360 da gennaio 2016 a ottobre 2018.

\*\*Il sistema di riparazione meniscale NOVOSTITCH PRO è stato autorizzato per la vendita ed è disponibile solo negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda.



**+ Leader nella  
riparazione  
meniscale  
all-inside  
(tutto  
dall'interno)**

L'unica linea di dispositivi  
all-inside supportata da  
15 anni di evidenza clinica<sup>1</sup>

**Smith+Nephew**

FAST-FIX<sup>◇</sup> 360  
Sistema di riparazione meniscale

# Lo standard per le riparazioni all-inside minimamente invasive.

Il design per l'azionamento a 360° del sistema FAST-FIX<sup>®</sup> 360 offre un controllo migliore,<sup>3</sup> consentendo il rilascio degli impianti in qualsiasi posizione "oraria" – verticalmente oppure orizzontalmente sull'uno o l'altro lato del menisco – con un movimento progressivo rapido e regolare. Il design con azione a molla agevola l'avanzamento di ciascun impianto nella capsula e la conferma udibile ne garantisce l'avvenuto rilascio. Offre la robustezza di un punto di sutura verticale da materassaio senza la tradizionale incisione aperta.<sup>2</sup>

Il sistema FAST-FIX 360, disponibile dritto, curvo e curvo reverse, consente:<sup>3</sup>

- Piccoli punti di inserimento
- Facile rilascio degli impianti
- Controllo migliore grazie allo stelo dell'ago a basso profilo e più rigido
- Riparazione meniscale solida, riproducibile e facile

Limitatore di profondità regolabile contribuisce a evitare i fasci neurovascolari posteriori al menisco

Rilascio attivo a 360° consente di rilasciare rapidamente e facilmente gli impianti in qualsiasi posizione "oraria"<sup>3</sup>

Punta dell'ago incisa a laser funge da rapido punto di riferimento per la penetrazione in profondità dell'ago stesso


Ago calibro 17 riduce al minimo la distruzione del menisco<sup>3</sup>

Sutura in due colori offre una migliore visibilità contro la zona bianca del menisco


Impianti a basso profilo che consentono il riposizionamento

## Trattamento di lesioni inferiori con dispositivo curvo reverse


I dispositivi curvi e curvi inversi agevolano l'accesso ai siti di lesioni sulle superfici superiori e tibiali del menisco. L'angolatura e l'orientamento dell'ago sul dispositivo curvo reverse sono destinati a facilitare la perforazione del lato inferiore del menisco al fine di ottenere una riparazione flat ottimale.

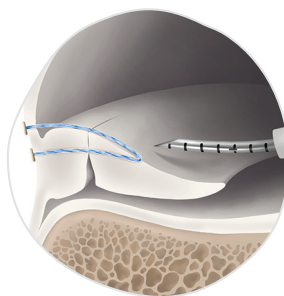

FAST-FIX 360 curvo

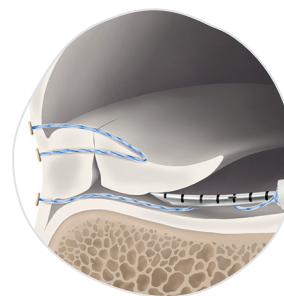

FAST-FIX 360 curvo reverse

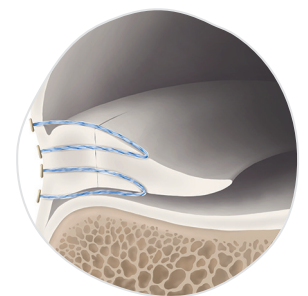

Chiusura uniforme della lesione e riduzione del menisco

Curvo

Dritto

Curvo reverse

# La riparazione all-inside con FAST-FIX<sup>◇</sup> si è dimostrata sana funzionalità del ginocchio<sup>1</sup>

## Punteggio di Lysholm

92,8  
punteggio medio  
postoperatorio  
FAST-FIX<sup>1</sup>

94  
punteggio medio  
in adulti sani<sup>4</sup>



0 92,8 94 100

## Punteggio delle attività di Tegner (TAS, Tegner activity score)

5,7  
punteggio medio  
in adulti sani<sup>4</sup>

6,3  
punteggio medio  
postoperatorio  
FAST-FIX<sup>1</sup>



0 5,7 6,3 10

## + Oltre 20 anni di innovazione nella riparazione meniscale

1999  
Sutura T-Fix

2001  
FAST-FIX  
Sistema di  
riparazione  
meniscale

2007  
ULTRA FAST-  
FIX Sistema  
di riparazione  
meniscale

2011  
FAST-FIX 360  
Sistema di  
riparazione  
meniscale

2013  
MAT  
Indicazione  
della  
procedura

2017  
MENISCAL  
ROOT Sistema  
di riparazione



In tutto il mondo, un dispositivo  
FAST-FIX 360 viene venduto ogni  
2 minuti\*



rata clinicamente efficace nel ripristino di una

## Punteggio IKDC

86,6  
punteggio medio  
postoperatorio  
FAST-FIX<sup>1</sup>

91,6  
punteggio medio  
in adulti sani<sup>5</sup>



0 86,6 91,6 100



2018  
FIRSTPASS<sup>o</sup>  
MINI Passa-  
suture

2019  
NOVOSTITCH<sup>o</sup>  
PRO Sistema  
di riparazione  
meniscale\*\*



**86%**  
incidenza media di  
successo di tutte le  
riparazioni all-inside  
FAST-FIX<sup>1</sup>